2024 年　4 月　1 日作成（新様式第 2 版）　　医療機器届出番号　13B1X10185000007


機械器具　74　医薬品注入器
一般医療機器　浣腸用キット　11582000

レネロエネマバケットセット

【禁忌・禁止】
〇本品のチューブをそのまま挿入しないでください。
〇工業用の洗剤や漂白剤は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】
本品は容器、チューブ、チューブクリップ、チューブコネクターからなる。

【構造図】（※代表図：品種により構成部品が異なる場合がある）

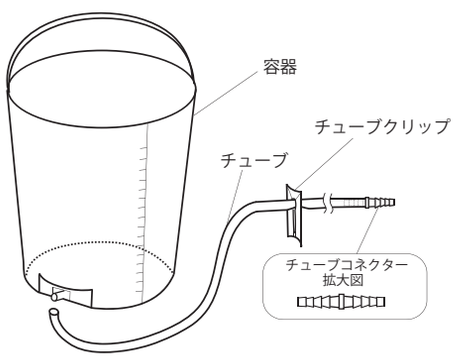

＜素材＞フェーノール樹脂、塩化ビニール、ポリプロピレン

【使用目的又は効果】
本品は、液を直腸に注入するために用いる用具を集めたパッケージで、大腸の排便を促進して腸の機能を高めることを目的とする。

【使用方法等】
チューブを容器の下部にあるチューブ接続口にしっかりと繋げます。チューブがチューブクリップでしっかりと閉じられていることを確認します。チューブの先端にコネクターを接続し、ネラトンカテーテル（別売り）と繋げます。

使用方法に関連する使用上の注意
1. 接続部は、確実に接続又は取り付けられていることを確認して使用してください。
2. 接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないでください。
3. 体調がすぐれない時は使用を控えてください。
4. 本品に締め付け等、過度な力を加えないように注意してください。破損する可能性があります。

＜＜洗浄について＞＞
1. 使用後及び使用前には、必ず水道水で洗浄してください。
2. 漂白剤は使用しないでください。劣化を促進します。
3. 家庭用の洗剤（中性）以外の洗剤は使用しないでください。また、洗剤を使用した場合は十分に洗い流してください。

【使用上の注意】
重要な基本的注意
1. 包装が破損、汚損している場合や製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないでください。
2. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用してください。
3. あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用してください。使用中は破損、接続部の緩み及び液体の漏れ等について、定期的に確認してください。
4. 本品に衝撃や、過度な圧力を加えないでください。破損する可能性があります。
5. チューブは定期的に交換することをお勧めします。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
　直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
　３年（自己認証により設定）

【包装】
容器（1500ml）、チューブ（2m、5-7mm）、
チューブクリップ、コネクター / 1 セット

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売
レネロファーマ株式会社
〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-25-2F
電話番号：03-6277-0897

RENELO