2024 年　6 月　10 日改定（第 1 版）　　医療機器届出番号　13B1X10185000009

医療用品　04　整形用品

一般医療機器　皮膚バリア粘着プレート　31071000

レネロ皮膚酸素ブロックシート
RUGFUS
ラグファス


【禁忌・禁止】

〇表皮の形成されていない開放創および粘膜には使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品は、テープ材及び付属のゲルを組み合わせて使用する。
テープ材は種類によって長さや面積の異なるものがある。

【構造図】

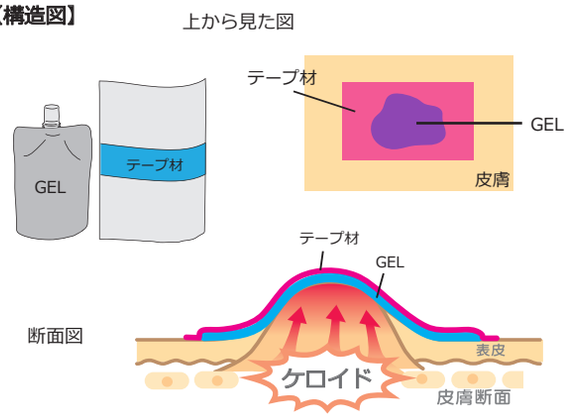

point GEL とテープ材の間に空気が入らないように密着させる。

【使用目的又は効果】

外部の汚染物質から傷あとなどの皮膚部位を保護するために皮膚に粘着する密着シートです。

【使用方法等】

1. 貼付部位の汗や汚れ等を清潔な布などで拭き取ります。
2. ゲルを傷あと等の皮膚面を覆うように塗ります。
3. テープ材をゲルの上から空気が入らないようにしっかりと密着させて貼り付けます。
4. 継続的に使用することをおすすめします。
5. テープ材が大きすぎる場合は、適度な大きさにカットしてご使用ください。

使用方法に関連する使用上の注意

1. ゲルは適宜洗い流して、テープを貼り替えてください。
2. ゲルとテープ材の間に空気が入らないように密着させてください。
3. テープ材の端にゲルが付着すると剥がれやすくなるのでゲルはテープ材の端にはみ出さないように気をつけてください。
4. 入浴時には取り外してください。
5. 皮膚の損傷を防ぐため、テープ材を剥がす時は片側から皮膚を引っ張るように剥がさず、転がすように剥がしてください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないでください。
2. 本品の使用中に皮膚のかゆみ、赤みなどの症状があらわれた場合はただちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
3. 本品を口や鼻に入れると窒息の危険がありますので、小児及び監督を必要とする方の手の届かないところに保管してください。
4. 排水管などの詰まりの原因になりますので、洗面所、トイレ等には流さないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
   水ぬれに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
   製造日より 3 年。(自己認証により設定)

【包装】

ゲル、テープ材 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造・製造販売
レネロファーマ株式会社
〒106-0047 東京都港区南麻布 5-10-25-2F
電話番号：03-6277-0897