



機械器具 62 歯科用切削器

管理医療機器 歯科用多目的超音波治療器（JMDN コード：70719000）


特定保守管理医療機器 「ソルフィー F」、「ソルフィー（組込み式）」の付属品
チップ

【警告】


- 滅菌可能な構成品は、患者ごとに、指定する方法及び条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。
[感染予防のため]

【形状・構造及び原理等】

1. チップの形状

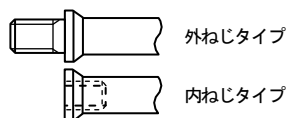

ハンドピースへの接続部は外ねじタイプと内ねじタイプがある。

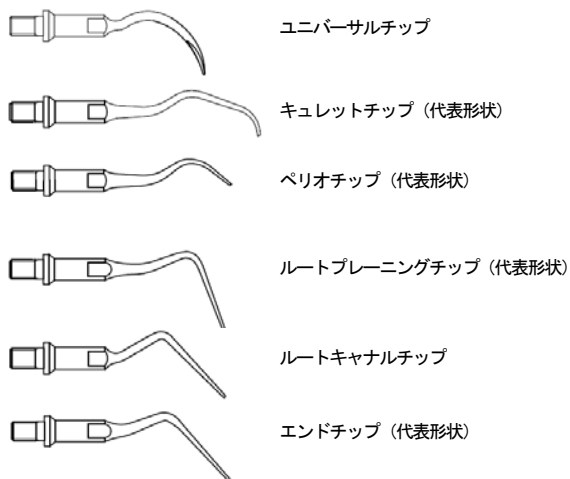

2. 原理

本装置は超音波スケーラーで、歯科用ユニット等のフットスイッチを踏込む等の信号を受けたとき、制御回路に電圧が印加され、発振回路により振動子が振動し、振動子の先端にセットしたチップ、ファイル等にこの振動が伝わる。この振動により、歯石や歯垢の除去、歯の切削等をする。

【使用目的又は効果】

「ソルフィー F」又は「ソルフィー（組込み式）」の添付文書を参照

【使用方法等】

「ソルフィー F」又は「ソルフィー（組込み式）」の添付文書を参照

【使用上の注意】

重要な基本的注意

「ソルフィー F」又は「ソルフィー（組込み式）」の添付文書を参照

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 温度：-10℃～+70℃
- 湿度：10%～85%（結露、氷結なきこと）
- 気圧：70kPa～106kPa
- 直射日光に長時間さらされないこと

2. 耐用期間

製品設置日より、6 年間。（自己認証（当社データ）による。）

※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

【保守・点検に係る事項】

「ソルフィー F」又は「ソルフィー（組込み式）」の添付文書を参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者：

株式会社 モリタ製作所

京都府京都市伏見区東浜南町 680 番地

075-611-2141

テクニカルセンター 受付時間 9:00-12:00、13:00-17:00

（土・日・祝日を除く、弊社営業日）

Tel：0120-802036

Fax：075-605-2349

e-mail: customer@jmorita-mfg.co.jp