
機械器具　66　歯科用練成器
一般医療機器　歯科用アマルガム混こう器　(10082000)
ウルトラマット２

【形状、構造及び原理等】

1.形状

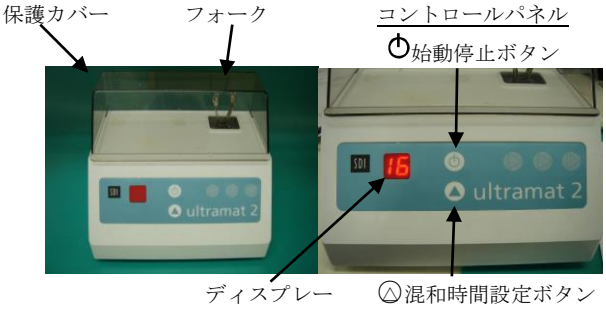

2.梱包内容

ウルトラマット２本体、電源コード、六角レンチ（輸送時駆動部固定用ネジ脱着に使用）

3.原理

電動力を用い、歯科用材料が充填されたカプセルをフォークに装着し震蕩することで、材料を混ぜ合わせる。

4.品目仕様等

・使用電圧　周波数：　100V　50／60Hz
・消費電力：　60VA
・本体の寸法(mm)：　180(高)×173(長)×217(幅)
・重量：　2.765kg
・練和時間：　1～16 秒(1 秒単位)
・連続使用回数：　8 秒×30 回まで(1 時間当)
・回転数：　4600 回／分
・電気ショックからの保護：なし
・液体侵入からの保護：　なし
・使用条件：　温度 10～40℃(結露凝結しないこと)

【使用目的又は効果】

歯科用水銀と合金が充填されたカプセルやカプセルに充填された他の歯科材料の練和に使用する。

【使用方法等】

使用前準備

1.梱包内容が揃っていることを確認してください。
2.本器底部中央付近にあるネジ(IMPORTANT と表記)に付属の六角レンチを挿入し、輸送中における駆動部固定用ネジを外してください。
3.平らな面に本器を置きます。
4.電源プラグをコンセントに差し込み、本器背面の電源スイッチを ON にします。直後、本器前面のディスプレーに、「8」が表示されます。

練和時間の設定

保護カバーを閉めた状態で、本器前面にある混和設定時間ボタンを押し、所要練和時間を設定します。1 回押すごとに練和時間が 1 秒延長します。1～16 秒の間で練和時間を設定できます。16 秒の表示に続いては、1 秒となります。この設定値は、電源スイッチを切っても記憶され、電源スイッチを入れるとディスプレーに表示されます。

カプセルの装着

1.保護カバーを開けます。
2.カプセル上部を左側に向け、フォークに確実に装着します。
3.保護カバーを閉めます。

カプセルの練和

1.保護カバーを閉めます。
2.始動停止ボタンを押します。保護カバーが開いている状態では作動しません。
3.始動後、ディスプレーに練和時間の残数が表示され、所定の時間で練和を終了します。練和終了時のディスプレーには、設定した練和時間が表示されます。
練和を中断するには、保護カバーを開けるか、始動停止ボタンを押します。保護カバーを開けると、動作を停止し、ディスプレーには、練和設定時間が表示されます。始動停止ボタンを押して中断すると、ディスプレーには練和時間残数が表示されたままとなります。これをリセットするには、一度電源スイッチを切り、再度入れてください。あるいは、始動停止ボタンを押し、残数時間分作動させてください。

終了

終了時には、本器背面の電源スイッチを切ります。

【使用上の注意】

［使用注意］
1.患者、使用者の安全を考慮し、使用には十分注意を払うこと。
2.強い衝撃を与えないこと。特に落下させないように注意すること。
3.本器を破損するような使用方法やメンテナンス法を避けること。

［重要な基本的注意］
1.本器の使用にあたっては、外観上の損傷の有無や各部位の緩み異常音等がないかを確認し、異常を認めた場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
1.本器は温度 10～40℃(結露凝結しないこと)で保管すること。
2.本器は、酸、アルカリ等と一緒に保管しないこと。
3.本器は、子どもの手の届かないところに保管すること。
4.本器を可燃性物質の近くや爆発の危険性のある状況下にて、使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1.初めての使用、毎日の使用に際し、使用前に必ず本器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2.フォークにカプセル装着時、カプセルが確実に固定されない場合、フォークの交換が必要となることがあります。ご購入先等に点検等を依頼すること。
3.外観上の損傷の有無や各部位の緩み(フォーク、保護カバーなど)、異常音等の有無、保護カバーによる作動中断等の動作を確認すること。
4.作動時に異音がする場合、駆動部固定用ネジが取り付けられたままの状態のことがありますので、確認のうえ、取り外すこと。
5.薬液消毒を行う場合、硬く絞った柔らかい布、ガーゼ等に、歯科機器用表面消毒薬(グルタールアルデヒド、グルコン酸クロルヘキシジン、70%イソプロピルアルコールなど)を含ませて、本器の表面を清拭します。
6.研磨材を使用しないでください。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　株式会社モリムラ
電話番号　03-5808-9350
製造業者　SDI　Limited（SDI 社）
製造国　オーストラリア