

2024年5月（第1版）

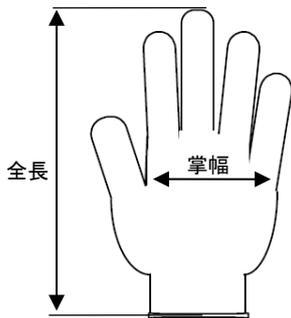
医 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

テンピークス グレイシアゼロ コーツ ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止。**【形状・構造及び原理等】****（概要）**

本品はニトリルゴム製の副材料に打粉を含まないパウダーフリーの未滅菌の使い捨て検査・検診用手袋である。手袋の内側に使用者の皮膚保護のため、コロイド状オートミールを塗布している。

（形状・構造）

サイズ	掌幅	全長
XS	76±4	230 以上
S	86±4	
M	98±4	
L	107±4	

(単位：mm)

（原理）

治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合に、主に使用者の手に装着することにより、本品が防護壁となり患者及び使用者を交差感染から守る。

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して着用する。

【使用上の注意】**1) 使用注意**

- 本品はディスポーザブル製品であるので再使用は行わないこと。
- 開封後の箱は直射日光や強い人工光を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
- 本品を強い化学薬品に対し長時間直接使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- 万一、装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 使用後は感染防止に留意して、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】**1) 貯蔵・保存方法**

水濡れに注意し、直射日光、オゾン、高温多湿を避けて保管すること。

2) 使用期限

製造後5年〔自己認証による〕
使用の期限は包装に記載する。

【包装】

2~200枚/箱
入数は、各包装材に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**（製造販売業者）**

株式会社モレーンコーポレーション
東京都中野区東中野五丁目1番1号 ユニゾンモール 3F
TEL:03-5338-3911