* 2026 年 10 月　（第 2 版）
2021 年 4 月　（第 1 版）

認証番号　21300BZZ00246000

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用ロック 38741000

ニューST ロック

再使用禁止


【禁忌・禁止】
＜適用対象（患者）＞
- ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

＜使用方法＞
- 本品は再使用しないこと

【形状・構造及び原理等】
本品は歯科矯正用の舌側弧線維持装置であり、下記により構成される。

種類：用途に応じて次の種類がある。


1. レギュラー (全長 50mm 高さ 3mm)

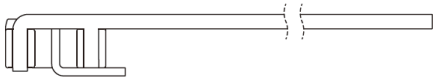

2. エクステンション (全長 100mm 高さ 3mm)



3. ミニ (全長 50mm 高さ 2mm

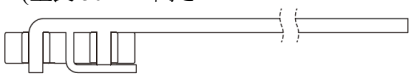


部品名		材　質
脚部	主線	コバルトクロム合金
	副線	
	ストッパー	ステンレス鋼
維持部		ニッケルクロム合金

【使用目的又は効果】
歯列矯正用ワイヤをブラケット等に固定する。

【使用方法等】
矯正治療の際、原則的には左右の第 1 大臼歯の帯環にろう付して使用します。

技工作業の際は、本品のろう付部を鉗子などでつかまないようご注意ください。
主線を曲げる際は、ろう付部を避けて作業してください。
（下図参照）

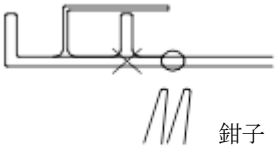

鉗子

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1. ろう付作業中は換気に十分注意するとともに、保護めがねを使用して目を保護すること。また、作業終了後は速やかに洗面、洗眼、うがいなどを行いフラックスによる汚染を除くこと。

2. ソルダーは、低融のろう線（オーソソルダー：液相点 650℃）を使用すること。

3. フラックスは、歯科用フラックスを使用すること。
歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【使用上の注意】*
［使用注意］（次の患者には慎重に適用すること）
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

［重要な基本的注意］
(1) 過度な操作により、主線のストッパー及び副線のろう付部が破損、脱落することがあるので、取扱いは慎重に行うこと。
(2) 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
(3) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
(4) MRI 検査を受ける際は、本品を用いた矯正装置を装着していることを担当医師へ申し出るよう伝えてください。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社モリタデンタルプロダクツ
電 話 番 号 ： 0287-29-2221

［お問い合わせ先］
問 合 せ 窓 口 ： 株式会社 JM Ortho
電 話 番 号 ： 03-5281-4711
F a x 番 号 ： 03-5281-4716

NF-TB144