2006年12月13日作成（第1版）　　承認番号：21800BZY10255000

類別：器51　医療用嘴管及び体液誘導管
一般的名称：チューブ及びカテーテルの周辺関連器具（活栓）100420001

エルカム ストップコック


再使用禁止

【警告】
1）本品を最大耐圧以上で使用しないこと。
2）脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ひまし油等の油成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合、又はアルコールを含む消毒剤を使用する場合は本品のひび割れに注意すること。

【禁忌・禁止】
1）再使用禁止。
2）使用前に滅菌包装に破損、水濡れ等の異常が認められる場合は使用しないこと。

【形状・構造等】
（概要）
本品は、心臓用カテーテルを用いて、観血式血圧測定、PTCA（経皮的冠動脈形成術）、PTCR（経皮的冠動脈血栓溶解術）、心臓血管造影等を行う際に用いる注入ライン等に使用する三方活栓である。オスルアーには固定式のものと回転式のものと、ハンドルの表示がONのものとOFFのものがあり全部で4種類ある。

（形状・構造）

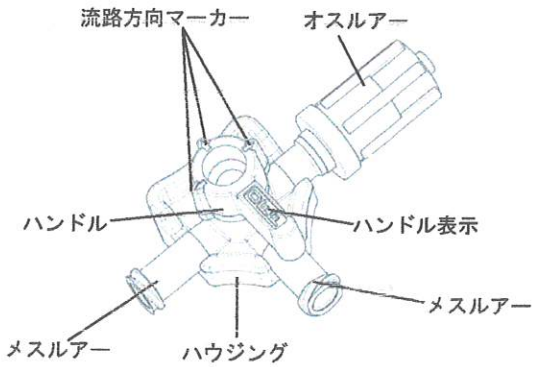

品番	オスルアー形式	ハンドル表示
565006	固定	ON
565312	回転	ON
565303	固定	OFF
565311	回転	OFF


【使用目的、効能又は効果】
本品は、心臓用カテーテルを用いて、観血式血圧測定、PTCA（経皮的冠動脈形成術）、PTCR（経皮的冠動脈血栓溶解術）、心臓血管造影等を行う際に用いる注入ライン等に使用する活栓である。

最大使用耐圧：6.8MPa(1,000psi)

【原材料】
本　　体　　：ポリカーボネート
ハンドル　　：HDPE

【操作方法又は使用方法】
1）本品は、ディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで再使用しないこと。
2）本品に破損等が無いことを確認すること。
3）包装内から取り出し、ライン等に接続する。
4）ハンドルの切り替え：
※ハンドルには「ON」と記載されているものと、「OFF」と記載されているものがある。

○ハンドルを回転させて開放したい流路をハンドルの流路方向マーカーを参照し、回転させる。

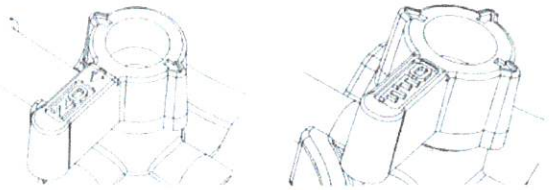

「ON表示」　　「OFF表示」

【使用上の注意】
1）本製品はディスポーザブル製品であるので、再使用は行わないこと。
2）包装から取り出す際や接続の際には汚染に十分注意すること。
3）滅菌包装を開封した後は、何らかの事情で使用しない場合は廃棄すること。
4）使用中は本品の破損、接合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
5）ひび割れが生じた場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
6）コネクターへの過度な締め付けはひび割れの原因になるので、注意すること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】
直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

【有効期限】
製品ラベルに記載。〔自己認証（当社データ）による〕

【包装】
10個／箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】
（製造販売業者）
株式会社ユーシンメディカル
東京都文京区本郷2-26-3
Tel. 03-3844-1415　　Fax 03-3815-5782

（製造業者）
エルカム　メディカル　エーシーエーエル社
パーラム　13860　イスラエル