
作成年月日2016年03月18日　　届出番号 13B3X10192000014

類別 医06視力表及び色盲検査表
一般的名称 色覚検査機器
一般医療機器（クラス1）

販売名 石原式色覚異常検査表 ｺﾝｻｲｽ版14表

「使用目的又は効果」
色覚異常のタイプを完全に分類するため、眼科専門医が使用する

「形状・構造及び原理等」
上質紙、厚紙にｶﾗｰﾁｬｰﾄを特殊に印刷した色覚検査表で色覚異常検査に使用する
第1表から第14表までの見方によって色覚を判定する

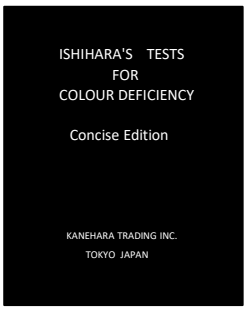

寸法：147×215×10mm
ｺﾝｻｲｽ版14表

「使用方法等」
①昼光下の一様な明るさの中で行う。止むをえない場合は昼光色蛍光灯を用いるが500LUXを超えないようにする
②検査距離は目から約75cmの距離で、表の面が視線とほぼ直角になるようにする
③検査時間は数字表はおよそ3秒以内とし、最初誤り後自発的に訂正したものは正読とする。曲線表をたどらせる場合はおよそ10秒以内とする。
④判定及び詳しい取り扱いは説明書をお読みください。
⑤本表は医師等医療に精通した者が使用してください。
⑥本表及び患者に異常があった場合は直ちに使用を中止して適切に処置してください

「保管方法及び有効期間等」
①本表は十分特殊なｲﾝｸにより印刷してありますが、長く光に当たれば変色は免れないため、必要時間以外には表を閉じて下さい
②長い年月を経過すれば、表の色はある程度変色するので本表により良好な検査成績を得るためには、刊行後3年以内の物を使用して下さい
③本表を直接手で擦ったり、乱暴に取り扱わないで下さい
④破損、変色等ありましたら交換してください
⑤本表の保管は常温常湿で、極端な湿度、温度で保管しないで下さい

「取り扱い上の注意」
①ご使用後、水、溶剤等で拭かないで下さい（本表は触れないことが望ましい）
②表面に傷をつけないようにご注意下さい
③落下等による破損にご注意下さい
④本表に傷、汚れ、焼け等出た場合は交換してください
⑤本表を曲げたり、表面に傷をつけたり、模造品を加工する事は絶対にしないで下さい

「主要文献及び文献請求先」
名称 有限会社カネハラトレーディング
郵便番号113-0034
住所 東京都文京区湯島二丁目31-14
TEL 03-3813-0287
FAX03-3813-0285

「製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等」
製造販売業者
名称 有限会社カネハラトレーディング
郵便番号113-0034
住所 東京都文京区湯島二丁目31-14
TEL 03-3813-0287
FAX03-3813-0285

製造業者
名称 有限会社カネハラトレーディング

取り扱い説明書を必ずお読み下さい