
機械器具 65　歯科用充填器
管理医療機器　電動式歯科用螺旋状除去器　JMDN 70688000

デントクラフト　ＧＰＸ

【禁忌・禁止】
本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるので、本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】
１．外観及び寸法

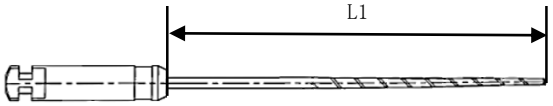

軸部（シャンク）　　作業部

呼び	色	L1	テーパー
025	赤	21±0.5	0.02
030	青		
035	緑		
040	黒		
045	白		
050	黄		

（単位：mm）

２．原材料
シャンク部：真鍮（金メッキ）
作業部：ステンレス鋼

３．作動原理
本品は能動型医療機器に接続して使用する。能動型医療機器が回転することで、作業部が摩擦により発熱し根管内の充填物を軟化させ除去する。

【使用目的又は効果】
能動型機器に接続し根管内の充填物を除去するために用いる。

【使用方法等】
①本品をコントラアングルハンドピースに取り付ける。
②本品を根管内で回転させ、ガッタパーチャを排出させる。
（使用回転数は 3,000～5,000r.p.m.）
③使用後は、コントラアングルハンドピースより取り外し、洗浄を行う。

(使用方法に関する使用上の注意)
①本品をコントラアングルハンドピースに取り付けるときはシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
②あらかじめ口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
③口腔内での破損、曲がり等の原因になるので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
（4N・ｃｍ未満での使用を推奨する。）
④使用前にファイルの金属疲労、傷、曲がり等の劣化の有無を調べること。
⑤目の損傷を防ぐために保護メガネを着用すること。
⑥注水やエアー、バキュームは使用しないこと。

【使用上の注意】
１．使用注意
使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。

２．重要な基本的注意
本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】
(保管方法)
①本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
②水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

(使用期限)
容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

【保守・点検に係る事項】
(洗浄方法)
①本品を金属製のインスツルメント収納ケースに入れて、超音波洗浄剤もしくは超音波洗浄に使える小器具洗浄剤で超音波洗浄を行うこと。
②本品がすべて洗浄液に浸かるように十分な量の洗浄液を入れること。
③洗浄後は十分にすすぐこと。仕上げすすぎには精製水を用いることを推奨する。
④洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。
⑤消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。

(滅菌方法)
①滅菌前に汚れ、傷、損傷等の有無を調べる。
②点検後、高圧蒸気滅菌を行う。滅菌は 134℃で 6 分間または 121℃で 30 分間行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号 ：03-3845-2931
ＦＡＸ番号 ：03-3841-8204

製造元：蘇州パックデントテクノロジー社
Suzhou Pac-Dent Technology Co., Ltd.
（中華人民共和国）