2026 年 8 月（第 1 版）　　認証番号：308ADBZX00054000

機械器具 21 内臓機能検査用器具
管理医療機器 単回使用圧平眼圧計用プリズム 70059000


イージートン

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止
・圧平眼圧計(ゴールドマンタイプ)以外には差し込まないこと

【形状・構造等及び原理等】
1. 概要
本品は、圧平眼圧計(ゴールドマンタイプ)の圧平子として使用する単回使用のプリズムである。圧平子を角膜に押し当てて一定の圧平面積が得られる力を計り、圧力に換算し、圧平状態を光学的に測定するために使用される。

2. 形状及び構造

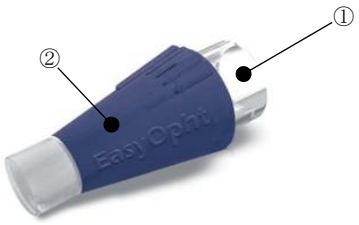

原材料　① プリズム：メタクリル樹脂
② カバー：TF9FMA
重量　：1.65g±0.05

3. 原理
プリズム構造と角膜に接触したフルオレセイン染料の効果により生じた 2 つの半円を一致させることにより、眼圧値を測定する。

【使用目的又は効果】
本品は、眼球内の圧力を眼球壁の緊張度に基づいて角膜を介して測定し、情報を診断のために提供すること。

【使用方法等】
1. 使用前準備
・包装材及びプリズムに損傷やフィルムの剥がれ等がないか確認します。
・プリズムに触れないよう、包装材のフィルムを剥がして、プリズムを取り出します。

2. 機器への取り付け
・圧平眼圧計(ゴールドマンタイプ)のプリズムホルダーにプリズムを取り付けます。
・プリズムを回転させ、プリズムホルダーの目印とプリズムの目印が合わさるように調整します。

3. 測定の実施
・調整したプリズムを患者の角膜に軽く接触させます。
・プリズム内部のプリズム構造と染料の効果により、視野内に 2 つの半円が現れます。
・半円が一致した時点で、眼圧値を測定します。

4. 測定の終了
・圧平眼圧計(ゴールドマンタイプ)のプリズムホルダーからプリズムを取り外します。
・「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」従って適切に廃棄すること。絶対に再使用しないでください。

【使用上の注意】
重要な基本的注意：
・使用前に包装材及び本品が損傷していなか確認し、損傷している場合は使用しないこと。
・最適な使用のため、スリットランプ光軸が-20° ～+20° の範囲に配置すること。
・本品の使用者は、医師または法的資格を持つ人だけに限定すること。
・本品を素手で触れないこと。
・有効期間が過ぎている場合は使用しないこと。

廃棄：
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」従って適切に廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】
(1) 保管方法
直射日光や高温を避けて保管して下さい。
(2) 保管条件
温度：-2～+45℃
(3) 有効期間
滅菌日より 3 年。
有効期間は滅菌包装及び外箱に記載されています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
株式会社レクザム 香川工場
TEL：087-879-3131
外国製造業者
FE-GROUP SRL イタリア

お問合せ先
株式会社レクザム アイケア機器営業部東京オフィス
TEL：03-6262-9471

RB-B01-B004