

機械器具 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000

プレッシャーケア

【禁忌・禁止】

・亀裂、破損、汚れが認められる場合は使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

・テーブルパッド



AZ610 AZURE テーブルパッド 520(L)×520(W)×10(H)mm
AZ611 AZURE テーブルパッド 1150(L)×520(W)×10(H)mm

Elite テーブルパッド

EL030 520(L)×520(W)×20(H)mm
EL031 1150(L)×520(W)×20(H)mm

Oasis オペレーティングテーブルパッド

OA030 1800(L)×520(W)×10(H)mm
OA031 1150(L)×520(W)×10(H)mm
OA032 520(L)×520(W)×10(H)mm

Oasis 小児科用オペレーティングテーブルパッド

OA033 900(L)×380(W)×10(H)mm

Oasis インキュベーターパッド

OA300 620(L)×340(W)×12(H)mm

Oasis テーブルパッド

OA036 225(L)×500(W)×10(H)mm
OA037 990(L)×500(W)×10(H)mm
OA038 500(L)×500(W)×10(H)mm

Oasis ペリニールテーブルパッド

OA040 520(L)×520(W)×10(H)mm

Oasis プロファイルパッド

OA041 520(L)×520(W)×12(H)mm
OA042 1145(L)×520(W)×12(H)mm

Oasis プロファイルパッドカットアウト

OA043 1145(L)×520(W)×12(H)mm

Oasis ペリニールポストパッド

OA180 300(L)×260(W)×10(H)mm

・ヘッド、顔面用



AZURE ヘッドプロテクタ 260(L)×250(W)×50(H)mm



Elite クローズドヘッドリング ミディアム φ140×34(H)mm
Elite クローズドヘッドリングラージ φ200×50(H)mm

Elite オープンヘッドリング

ミディアム EL021 φ140×34(H)mm
ラージ EL022 φ200×54(H)mm

Elite ブローンヘッドレスト

ミディアム EL141 280(L)×240(W)×130(H)mm
ラージ EL142 280(L)×240(W)×140(H)mm

Elite スパインヘッドレスト

ミディアム EL151 275(L)×230(W)×65(H)mm
ラージ EL152 275(L)×237(W)×90(H)mm

Oasis クローズドヘッドリング

スモール OA010 φ90×20(H)mm
ミディアム OA011 φ140×35(H)mm
ラージ OA012 φ200×45(H)mm

Oasis オープンヘッドリング

スモール OA020 φ90×40(H)mm
ミディアム OA021 φ140×60(H)mm
ラージ OA022 φ200×75(H)mm

Oasis フェイスパッド

OA140 165(L)×80(W)×8(H)mm

・ポジショナー、チェストロール



AZURE ユニバーサルポジショナー 410(L)×145(W)×60(H)mm

Elite ドームポジショナー

EL210 350(L)×150(W)×75(H)mm

Elite チェストロール

EL214 305(L)×150(W)×100(H)mm
EL215 405(L)×150(W)×100(H)mm
EL216 510(L)×150(W)×100(H)mm
EL217 405(L)×150(W)×150(H)mm
EL218 510(L)×150(W)×150(H)mm

Elite ラテラルポジショナー

EL900 720(L)×500(W)×160(H)mm


Elite ブローンポジショナー

EL903 610(L)×530(W)×130(H)mm



ブローンポジショニングシステム

左上部 EL906 275(L)×250(W)×100(H)mm
右上部 EL907 275(L)×250(W)×100(H)mm
左中部 EL908 125(L)×250(W)×100(H)mm
右中部 EL909 125(L)×250(W)×100(H)mm
左下部 EL910 275(L)×250(W)×100(H)mm
右下部 EL911 275(L)×250(W)×100(H)mm

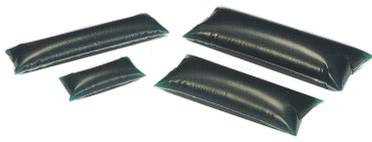

Oasis ポジショナー		
エクストラスモール	OA050	160(L)×80(W)×45(H)mm
スモール	OA051	330(L)×70(W)×50(H)mm
ミディアム	OA052	300(L)×120(W)×60(H)mm
ラージ	OA053	360(L)×125(W)×70(H)mm

Oasis フラットボトムチェストロール		
	OA211	305(L)×100(W)×75(H)mm
	OA212	405(L)×100(W)×75(H)mm
	OA213	510(L)×100(W)×75(H)mm

・アーム用



AZ200	AZURE アームプロテクタショート	330(L)×140(W)×30(H)mm
AZ201	AZURE アームプロテクタロング	460(L)×180(W)×35(H)mm



EL070	Elite アームボードパッドショート	400(L)×125(W)×20(H)mm
EL072	Elite アームボードパッドロング	600(L)×125(W)×20(H)mm

Elite コンタードアームボードパッド		
ショート	EL101	400(L)×150(W)×35(H)mm
ロング	EL102	510(L)×150(W)×35(H)mm

Oasis アームボードパッド		
	OA070	395(L)×115(W)×10(H)mm
ラージ	OA071	600(L)×200(W)×10(H)mm
ショート	OA072	600(L)×125(W)×10(H)mm

Oasis コンタードアームボードパッド		
	OA101	510(L)×150(W)×35(H)mm

Oasis アームサポート用パッド		
	OA100	170(L)×110(W)×10(H)mm
ワイド	OA102	162(L)×132(W)×10(H)mm

Oasis プラキアルナーブプロテクタ		
スモール		380(L)×115(W)×8(H)mm
ラージ		460(L)×210(W)×8(H)mm

・仙椎用



AZ300	AZURE 仙椎用プロテクタ	400(L)×380(W)×25(H)mm
AZ301	AZURE 仙椎用プロテクタラージ	450(L)×445(W)×30(H)mm



OA035	Oasis ヒップパッド	520(L)×520(W)×10(H)mm
-------	--------------	-----------------------

・レッグ用



AZ400	AZURE レッグプロテクタ	515(L)×180(W)×40(H)mm
-------	----------------	-----------------------

AZURE ヒールプロテクタ (ペア)		
	AZ401	190(L)×175(W)×30(H)mm

Elite ニーパッド		
スモール	EL401	510(L)×150(W)×35(H)mm
ラージ	EL402	400(L)×150(W)×35(H)mm

Oasis 足受台用パッド (ペア)		
スモール	OA090	315(L)×235(W)×10(H)mm
ミディアム	OA091	395(L)×245(W)×10(H)mm
ラージ	OA092	520(L)×300(W)×10(H)mm



EL130	Elite ヒールパッド (ペア)	180(L)×100(W)×70(H)mm
-------	-------------------	-----------------------

Oasis ヒールパッド (ペア)		
	OA130	200(L)×100(W)×65(H)mm

Oasis ヒールカップ (ペア)		
	OA131	105×90×43mm

Oasis ブーツパッド (ペア)		
	OA092	505(L)×145(W)×10(H)mm



OA190	Oasis トラクションブーツパッド	370(L)×240(W)×5(H)mm
-------	--------------------	----------------------

Oasis アンクルストラップ (ペア)		
	OA080	315(L)×45(W)×10(H)mm

Oasis ラージアンクルストラップ (ペア)		
	OA081	440(L)×45(W)×10(H)mm

Oasis ブーツパッド (ペア)		
	OA160	505(L)×145(W)×10(H)mm

AZURE 足受台用パッド (ペア)		
	AZ410	370(L)×205(W)×25(H)mm

Oasis プラス ヒールパッド (2個入り) (OP130) *



151(L)×134(W)×66(H)mm

Oasis プラス ヘッドアンドネックサポート (OP151)



264(L)×220(W)×66(H)mm

【使用目的、効能又は効果】


手術台に付属するアクセサリーをいう。

【使用方法等】

使用前に本品が外観上の不具合が無いことを確認すること。また、使用後は適切な方法で洗浄・消毒を行い、適切な方法で適切な場所に保管すること。

- ・テーブルパッド各種
手術台のテーブルトップに敷く。
- ・ヘッド、顔面用プロテクタ、リング及びレスト
手術台のテーブルトップと患者の頭及び顔面の間に挿入する。
- ・ポジショナー、チェストロール各種
手術台のテーブルトップと患者の身体の間に挿入する。
- ・アーム用プロテクタ及びパッド
アームボードに装着、もしくは手術台のテーブルトップと患者の腕、肘の間に挿入もしくは装着する。
- ・各種仙椎用プロテクタ及びパッド
手術台のテーブルトップと腰もしくは仙椎との間に挿入する。
- ・レッグ用プロテクタ及びパッド
手術台のテーブルトップと患者の脚、膝、踵に挿入もしくは装着する。
- ・ブーツ及び支脚器用パッド
ブーツ又は支脚器と患者の脚の間に挿入する。

OA190 Oasis トラクションブーツパッドの場合は以下の図を参照すること。

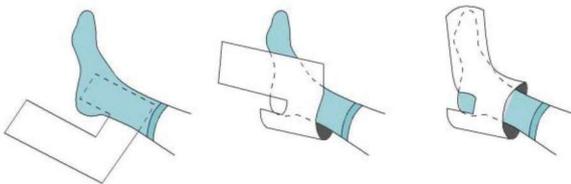

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意**
- ・使用する前に、患者の状態や本品の使用により患者に危害が及ぶ可能性について検討を行うこと。
- ・本品の使用中は、本品が正しく機能していることを確認すること。
- ・鋭利な器具を本品の上に置かないこと。[パッドやポジショナーのフィルムに穴を開ける可能性があるため。]
- ・患者が上に乗っている状態で手術台パッドは引っぱらないこと。[過剰

な力が加えられることにより製品に悪影響を及ぼす可能性があるため。]

- ・本品を粗雑な、又は尖った表面に接触した状態で引っ張らないこと。
- ・本品を切断したり、鋭利なもので刺したりしないこと。
- ・本品を高温、又は裸火にさらさないこと。
- ・本品に荷重のかかっている重い物体を持ち上げる際には適切な手段を用いること。
- ・製品の上に吸水シート等を敷くことは推奨しない。[本来の褥瘡防止効果が発揮されない場合があるため。] やむを得ずシート等を敷く必要がある場合には、糊付けしていないシートを製品の上に緩く被せ、シワ、折れ重なりがないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

●保管方法

- ・水のかからない平らな場所に保存すること。
- ・傾斜、振動、衝撃などの安定状態に注意すること。
- ・大きな手術台パッドは35cm程度に折りたたんで保管すること。
- ・保管中に本製品の上に重いものや尖ったものを置かないこと。
- ・室温(1~30℃)で保管すること。
- ・使用しないベルクロ付の製品のマジックテープは閉じた状態にしておくこと。

【保守・点検に係る事項】

●洗浄・消毒

- ・本品は一般的な中性の手術室用洗浄剤を使用し流水で簡単に洗浄することが可能である。浸漬洗浄は避けること。
- ・消毒する場合は、消毒用エタノールやイソプロパノールにて拭拭法にて行うこと。
- ・ポビドンヨードなどのヨウ素系の消毒剤と接触すると変色する場合がありますため、本品と長時間接触しないように、拭き取るなどの注意を払うこと。
- ・ベルクロによる接着部分は埃、毛髪、または異物がつきやすい為、常に清潔に保つこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

●製造販売業者

株式会社 リレート

TEL : 072-940-6804

〒581-0087 大阪府八尾市明美町1丁目1番24号

●外国製造業者

業者名 : トゥルーライフ社 (Trulife Group Limited)

国名 : アイルランド