認証番号　26B2X10025001000

2020 年 7 月（第 3 版）

2016 年 12 月（第 1 版）

医療器具 14　打診器

一般医療機器　電動式打診器（32953000）

ＡＯＰ（エーオーピー）

【禁忌・禁止】

●本器は電動式打診器である。他の目的には使用しないこと。

●直射日光の当たる場所、高温、高湿になる場所に設置しないこと。

●長期間（1 年以上）使用していなかった場合、業者による点検を必ずうけること。


●水をかけないこと。

●分解・改造は絶対にしないこと。

●当社の純正部品以外は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1．形状・構造

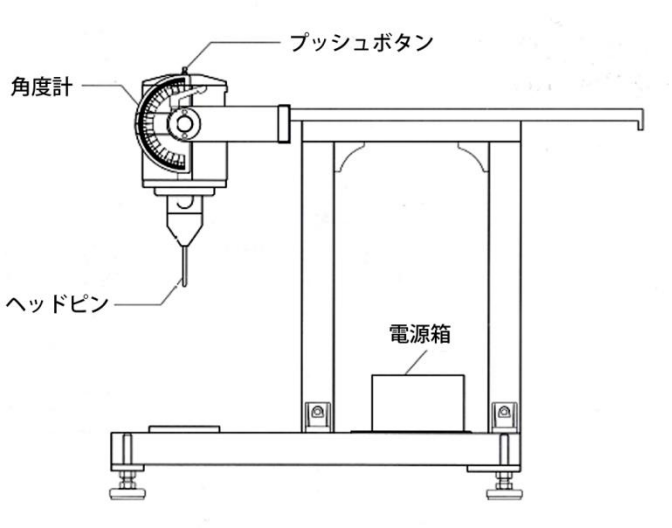

2．寸法

●本体　幅：375 ✕ 奥行：585 ✕ 高さ：620[mm]

3．定格電源

●100V 50/60Hz

4．原理

上部の赤いプッシュボタンを押すことにより、シリンダー内で電動によるピストン運動が行われる。その時に発生するバネの力でヘッドピンを叩く、力はヘッドピンを経由し先端部分から検査箇所へ伝わる。

【使用目的・効能又は効果】

反射を検査するため身体に力を伝達する器具。

【品目仕様等】

出力　　約 3 ポンド（約 1.36kg）

【操作方法又は使用方法等】

<設置場所について>

●がたつきが起きないよう、設置面が水平になっている事。

<次のような場所は避けること>

●湿度の高い場所。

●水がかかったり、濡れたりする場所。

●傾斜や振動のある不安定な場所。

●化学薬品の保管場所やガスの発生する場所。

<準備>

1）電源コードの電源プラグを室内コンセント（AC100V、50/60Hz）に接続する。

<使用方法>

2）使用前に、必要に応じて洗浄又は清拭する。

3）先端のヘッドピン部分を、角度計にて角度を調整し、反応を見る部位へあてる。

4）上部の赤いプッシュボタンを押す。

5）電動による、打診が行われる。

<終了時>

6）引き続き打診を行う場合は上記 2）から始める。

7）長時間使用しない場合は、電源プラグを抜く。

【使用上の注意】

1．重要な基本的注意事項

●傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意すること。

●使用前に、破損、変形、亀裂、傷等がないか、適切に機能するかを点検すること。破損等の不備が確認された場合は使用しないこと。

●使用時には必要以上の力を加えないこと、破損、曲がり等の原因になるため。

2．その他の注意

<電源設備についての注意>

●たこ足配線は避けること。（事故の原因になるため）

●電源の周波数と電圧及び電源入力に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1．保管方法

1）清潔な部屋に保管すること。

2）傾斜や振動のある不安定な場所に保管しないこと。

3）浴室や湿度の高いところ、水のかかりやすいところでは保管しないこと。

4）本器等は、次回の使用に支障のないよう清浄し、使用環境条件を満たすところに整理、保管すること。

2．耐用期間

5年

※耐用期間は、定期的な保守点検、及び必要に応じた修理を行う事により、性能が維持できる期間を意味する。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検>

1）以下の項目を使用前に点検すること。

●設置場所の確認

【操作方法又は使用方法等】を参照し、設置状況を確認すること。

●動作確認

ヘッドピンの先端部分に指先で触れて動作させ、力が伝わっているか確認する。

●電源プラグとコンセントの確認

ほこり等が溜まっていないことを確認すること。

2）以下の項目を使用後に点検すること。

●電源プラグの確認

コンセント抜いてあるかを確認すること。

●保管場所の確認

保管に適した場所に保管されていることを確認する。

<業者による点検>

●長期保管後（1年以上）後の使用前には業者による保守点検を受けること。

●保守点検を受ける場合は、下記の弊社へご連絡ください。保守点検の依頼または異常を発見したときは、お買い求め販売店、または弊社にご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者・製造業者

株式会社　レイアンドカンパニー

〒601-8173

京都府京都市南区上鳥羽西浦町 41 番地 2

電話番号：075（692）1923

ＦＡＸ番号：075（692）1926