
※2023年4月（第2版）
2016年4月（初版）　　医療機器認証番号：228AKBZX00041000

歯科材料０１　歯科用金属
管理医療機器　歯科非鋳造用合金　７０７９７０００

切削用歯科合金W　ＭＧ

【禁忌・禁止】
＜適用対象＞
本製品の材料であるステンレス合金にアレルギーが確認されている患者には適用しないこと

【形状・構造及び原理等】

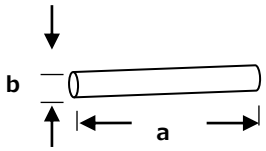

a：300 ～ 2500（10mm 単位ごと）
b：φ5 ～ φ30
（単位 mm、許容誤差±10%）

原理：切削加工されることにより歯科用修復物又は補綴物の作製に用いる。

【使用目的又は効果】
歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いること。

【使用方法等】
1．歯科用コンピュータ支援設計・製造（CAD/CAM）ユニットに加工データを入力する。
2．本製品を CAD/CAM ユニットにセットし、その取扱説明書に従い加工する。
3．加工された本製品を調整し、クラウン、インレー、コア等の歯科修復物を作製する。

【使用上の注意】
1.　使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本製品の材料に対する過敏症の既往を有する患者。
2.　重要な基本的注意
(1) 本製品は、歯科有資格者以外は使用しないこと。
(2) 本製品は、記載の使用目的以外に使用しないこと。
(3) 本製品から作製された歯冠修復物を臨床使用するに当たって、以下の内容に注意すること。
1) 臨床使用する前に、事前に術者は、この「添付文書」の内容を完全に理解すること。
2) 患者に適用可能であるかどうかを判断するために、十分な術前診査を行うこと。
3) 術後の定期的な診査も必要であり、必要に応じて咬合調整や患者への口腔衛生指導を行うこと。
3.　不具合・有害事象
重大な有害事象
歯冠修復物に用いられている金属材料がアレルギー反応の原因になることがある。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
貯蔵・保管方法
・ 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
・ 歯科の従事者以外が触れないよう適切に管理すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
和田精密歯研株式会社
大阪府大阪市東淀川区西淡路 3-15-46
06-6321-8551