事 務 連 絡 平成27年2月10日

各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課 御中

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 医療機器·再生医療等製品担当参事官室

医療機器プログラムの製造販売承認 (認証) 申請書及び添付資料の 記載事例について

「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号)の施行に伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条第1項及び第4項において、医療機器の定義に「プログラム」及び「これを記録した記録媒体」(以下「医療機器プログラム等」という。)が追加され、その取扱い等については、「医療機器プログラムの取扱いについて」(平成26年11月21日付け薬食機参発1121第33号、薬食安発1121第1号、薬食監麻発1121第29号厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)、厚生労働省医薬食品局安全対策課長、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長連名通知)により示したところです。

今般、平成26年度厚生労働科学研究費補助金(地球規模保健課題推進研究事業)による「医療機器に関する単体プログラムの薬事規制のあり方に関する研究」において、医療機器プログラム等の製造販売承認(認証)申請書及び添付資料の記載事例が下記のとおりとりまとめられました。医療機器プログラム等の製造販売承認(認証)申請書及び添付資料の作成に際し参考になると考えられますので、御了知の上、貴管内関係業者、関係団体等に対して周知いただきますよう御配慮願います。

なお、本事務連絡の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構、一般社団 法人日本医療機器産業連合会、米国医療機器・IVD工業会、欧州ビジネス協会医 療機器委員会及び各登録認証機関宛てに送付することとしています。 医療機器プログラム等の製造販売認証申請書及び添付資料の記載事例をそれぞれ別添1及び別添2に示す。また、医療機器プログラム等の製造販売承認申請書及び添付資料の記載事例をそれぞれ別添3及び別添4に示す。当該記載事例は、あくまでも例示であり、申請する医療機器の特性に応じて必要な事項を記載すること。

なお、「医療機器の製造販売認証申請書の作成に際し留意すべき事項について」 (平成26年11月20日付け薬食機参発1120第4号厚生労働省大臣官房参事官 (医療機器・再生医療等製品審査管理担当)通知)第4(2)及び「医療機器 の製造販売承認申請書の作成に際し留意すべき事項について」(平成26年11月 20日付け薬食機参発1120第1号厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)通知)第5(2)に規定する経過措置に基づき、平成 27年3月31日までに受け付けられる製造販売承認(認証)申請について、別添 2及び別添4に示す添付資料の記載事例を参考として差し支えないこと。 医療機器プログラムの製造販売認証申請書の記載事例

(注意)

・ 当該記載事例は、あくまでも例示であり、申請する医療機器の特性に応じて 必要な事項を記載すること。 様式第六十四(一)(第百十五条関係)

指定管理医療機器製造販売認証申請書

Q&A に従い 「プログラム」を 使用する

類		別	プログラム 1 疾病診断用プログラム ▶
名	5 名	称	汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム (コード:70030012)
版 売	Ē	名	画像解析ソフトウェア BP-2015
使 用 目 的 又	は効	果	別紙1のとおり
形状、構造及	び原	理	別紙2のとおり プログラム通 かにより き
原材		料	知により、記 載を要しない
性能及び安全性に	関する規	格	別紙3のとおり
使用	方	法	別紙4のとおり
保管方法及び	有 効 期	間	•
製造	方	法	/
製造販売する品目	コの制 生	ᇙ	名 称 登 録 番 号
殺垣販冗りる品に	の表垣	カー	別紙5のとおり
備	考		管理医療機器、クラスII 添付文書(案): 別紙6のとおり 医療機器製造販売業許可番号:○○○ 許可の区分: 第一種医療機器製造販売業許可 主たる事業所の所在地: 東京都○○○ QMS 適合性調査: 有り QMS 適合性調査申請書提出予定先:○○○○

上記により、指定管理医療機器の製造販売の認証を申請します。

平成 年 月 日

住所 東京都〇〇〇〇

氏名 医用画像システム株式会社

代表取締役社長 〇〇〇〇 印

(登録認証機関名称) 殿

申請する認証機関の正式名称を記載する

担当部門 〇〇〇〇 担当者 〇〇〇〇 日話番号 〇〇〇〇 Fax 番号 〇〇〇〇 e-mail 〇〇〇〇 業者コード 〇〇〇〇

使用目的又は効果

画像診断装置等から提供された人体の画像情報をコンピュータ処理し、処理後の画像情報を診療のために提供すること。

【考え方】

当該プログラムに係る一般的名称の定義を参考にし、認証基準の「使用目的又は効果」の範囲内で適切に記載する。 認証基準としてもうけられた○○装置用プログラムは基本的に○○装置でえられた結果をさらに処理して診療のために提供することを意図したものであり、他の医療機器を制御したり、人体から直接情報を収集するような機能は含まれていないので、この点に注意すること。

医療機器プログラムの製造販売認証申請における取扱いについて(薬食機参発1125第6号 平成26年11月25日)通知の記「2,付帯的な機能の取扱について」によること。

2 付帯的な機能の取扱いについて

<略>

また、当該プログラムに係る一般的名称の定義を参考に使用目的又は効果を適合性認証基準の範囲内で適切に記載し、既存品目の基準適合性認証審査において評価されていない性能、使用目的等を記載することはできないことに留意すること。

形状、構造及び原理

1. 概要

本プログラムは、X 線コンピュータ断層撮影装置(CT)、または磁気共鳴画像装置(MRI)で得られた情報を更に処理して診療のために提供するプログラムである。 三次元画像表示を行う標準機能の他、部位に特化した解析を行うオプション機能がある。

本プログラムは汎用 IT 機器にインストールして使用する。 記録媒体で提供される場合とダウンロードで提供される場合がある。


- ・記録媒体で提供されるのか、ダウンロードで提供されるのかが分かるように記載する。なお、記録媒体の特定(DVD、USB等の種類)は不要。
- ・製造販売業からは記録媒体で販売業に出荷し、販売業からはダウンロード販売の場合は、その旨を記載する。
- ・組み合わせて使用するものとして、既存の医療機器でも良いが、この場合は、一般的名称、承認等の 情報を明記する。また、この場合は、組み合わせる医療機器側においても、組み合せが可能であるこ とを添付文書等においても明確に記載しておくことが必要。

2. 動作原理

CT、MRI またはこれらの画像を保管しているサーバーから画像を受信し、診療のために表示する。 解析結果を保存することができる。

画像等の情報通信は DICOM 規格に準拠している。

接続例: 汎用 IT 機器は「使用方法」欄に記載した仕様を満たすものであること。

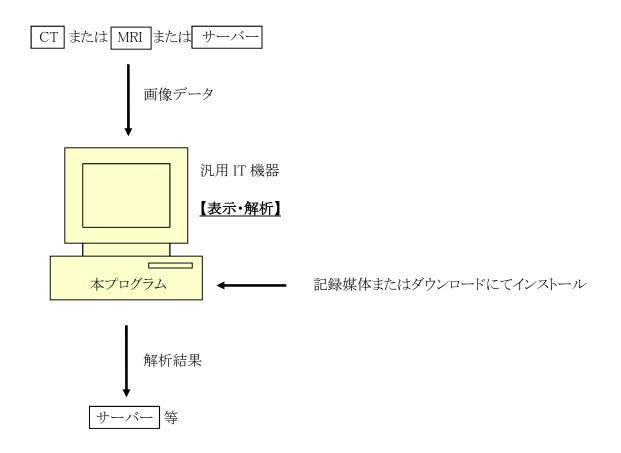

【考え方】

認証においては接続される機器やデータの流れを述べる程度とする。

但し、既存の医療機器の付帯的機能を医療機器プログラムの主機能として設定する場合は、処理機能について、概要を説明することが必要となる場合がある。

3. 付帯機能

本品目には以下の機能がある。

		処理対象	標準/
項目	機能説明	となる画	オプション
		像の種類	の別
三次元画像処	一連の画像データを三次元画像処理し、表示する機能。	CT, MRI	標準
理機能	また、三次元画像データに対し視点変更、任意断面へ		
	の展開表示や投影像表示を行うことができる。 ボリュー		
	ムレンダリング法、MPR 処理、最大値投影、最小値投		
	影、リフォーマット処理がある。		
計測処理機能	画像データが有する画素値や位置情報を用いた基本的	CT, MRI	標準
	な計測処理機能。 各処理機能を組み合わせることもで		
	きる。 距離、角度、面積、体積、画素値の平均値や標		
	準偏差、画素値表示(数値、プロファイル、ヒストグラム)		
	がある。		
CT/MRI フュー	CT 画像とMRI 画像の重ね合わせ表示を行う。	CT, MRI	標準
ジョン			
コロノグラフィ	大腸を内視鏡で観察するような三次元画像の連続表示	СТ	オプション
	を行う。		
パフュージョン	造影撮影された一連のCT画像を用い、その画像上の指	CT	オプション
	定部位の CT 値(信号)の時間変化をトレースすることで、		
	血流に関する情報を測定する機能である。 血流情報か		
	らファンクショナルカラーマップを作成し表示する。		

【考え方】

医療機器プログラムの製造販売認証申請における取扱いについて(薬食機参発1125第6号 平成26年11月25日)通知の記「2,付帯的な機能の取扱について」によること。

2 付帯的な機能の取扱いについて

「指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その1)」(平成17年6月8日付け薬食機発第0608001 号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知)等により示されている付帯的な機能については、既存品目と同様に、認証対象医療機器プログラム等においても付帯的な機能の範囲内での使用を目的としたものに限られること。したがって、付帯的な機能を含む認証対象医療機器プログラム等の認証申請書においては、既存品目との同等性の観点から、既存品目の認証書に記載されている範囲内で当該機能について記載するものであること。

<略>

なお、付帯的な機能の医療機器への該当性については個別に判断されるものであること。

性能及び安全性に関する規格

1. 性能に関する項目

項目	仕様	試験方法
画像や情報の処理機能	(以下の該当する基本機能を記載する。)・反転(上下反転、左右反転)・回転・拡大・縮小・階調処理・移動(シフト、パンニング)	サンプル画像を使用して正しく動作することを確認する。
画像表示機能	「画像や情報の処理機能」の処理 結果の正しい表示	「画像や情報の処理機能」の各機能 について、サンプル画像を使用して 正しく表示することを確認する。
外部装置との入出力機能	本品目が、指定した外部装置との間でデータの受送信を行うことができる。	サンプル画像を使用して各入出力機能が正しく動作することを確認する。

- ・主機能に対する項目を設定する。
- ・認証基準別表第2の 888「汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム」等においては、上記のように性能として認証基準別表第2の 487 として設けた基本機能を用いることが可能であるが、他の装置(医療機器プログラム)においては、申請するプログラムの機能から性能を設定する。
- ・この場合、医療機器プログラムの製造販売認証申請における取扱いについて(薬食機参発1125第6号平成26年11月25日)通知の記「2,付帯的な機能の取扱について」に留意すること。

2. 安全に関する項目

本プログラムについては該当なし。

- ・基本要件のライフサイクルへの要求(第12条第2項)への適合性としては、JIS T 2304 または妥当性を 説明できる IEC 規格や各国ガイダンス等を利用する考え方もある。
- ・基本要件の第12条第2項は経過措置期間(平成29年11月24日まで)適用しなくて良いため、この 事例では記載しないものとする。
- ・認証基準の適合すべき工業規格として JIS C 6950-1 が定められているが、本認証申請の範囲は「汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム」であり、ハードウェアを含まないため、この規格にプログラムに関する要求事項がなく、適用される事項がないため、この規格を記載することは適さないと考える。

使用方法

1. 動作環境及び事前準備

本品目は、下記の仕様を満たす汎用 IT 機器に製造販売業者が指定した方法(添付文書又はプログラムに含めた電磁的記録に記載された手順)でインストールして使用する。 汎用 IT 機器は、患者環境外に設置する。

汎用 IT 機器の仕様

インストール可能な汎用 PC 及び組み合わせる画像表示モニタ

安全性: JIS C 6950-1 適合

EMC: CISPR 22/CISPR 24、または VCCI 適合

汎用 PC 性能

OS:000

HDD(空き容量):○○○MB以上

メモリ: 〇〇〇MB 以上

プラットフォームの要件として、HDD、メモリサイズ、CPU、OS、電気的安全性(JIS T0601-1 又は JIS C6950-1)等を必要に応じて記載すること。

画像表示モニタ:

解像度○○○×○○○ピクセル以上、

輝度〇〇cd/m²以上

諧調

カラー表示

2. 使用準備

- (1) インストール先の機器の電源を入れる。
- (2) 本プログラムを起動する。

3. 操作

- (1) 画像データを取得する。
- (2) 機能を選択する。
- (3) 三次元画像表示等を行う。
- (4) 結果を保存する。

4. 終了

- (1) 画面上の終了アイコンをクリックするかあるいはメニュー項目から終了機能を選択し本プログラムを終了させる。
- (2) 必要に応じて電源を切る。

- ・汎用IT機器の指定方法として、添付文書や取扱説明書にて、具体的な製品モデルを示しても良い。
- ・既存の医療機器と医療機器プログラムを組みあわて使用できる場合は、その組み合せ機器について、一般的名称、販売名、承認等番号を記載し明確化すること。

製造販売する品目の製造所

番号	名 称	登録番号	製造工程
製造所 1	IMD, Inc	0000	設計
製造所 2	医療画像システム株式会社	0000	最終製品の保管

- ・医療機器プログラムの製造所としては、設計を行う製造所と記録媒体が製造販売業から出荷される場合には、最終製品の保管する製造所が登録対象となる。
- ・本事例では記録媒体の販売も含むため、「最終製品の保管」の製造所を記載。
- ・なお、設計が製造販売業の主たる事業所と同一の場所である場合には、製造所の登録を要しないが、この場合、製造所の登録番号の代わりに製造販売業であることを示す「88AAA88888」を記載する。

プログラム1 疾病診断用プログラム

管理医療機器 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム JMDN コード:70030012

画像解析ソフトウェア BP-2015

【形状・構造及び原理等】

本プログラムは X 線コンピュータ断層撮影装置 (CT) または磁気共鳴画像装置 (MRI) で得られた情報を更に処理して診療のために提供するプログラムである。三次元画像表示を行う標準機能の他、部位に特化した解析を行うオプション機能がある。

本プログラムは汎用 IT 機器にインストールして使用する。記録媒体で提供される場合とダウンロードで提供される場合がある。

機能

項目	仕様
画像や情報の 処理機能	(以下の該当する基本機能を記載する。) ・反転(上下反転、左右反転) ・回転 ・拡大 ・縮小 ・階調処理 ・移動(シフト、パンニング)
画像表示機能	「画像や情報の処理機能」の処理結果の 正しい表示
外部装置との 入出力機能	本品目が、指定した外部装置との間でデータの受送信を行うことができる。


付帯機能

項目	仕様
三次元画像処理機能	一連の画像データを三次元画像処理し、表示する機能。 また、三次元画像データに対し視点変更、任意断面への展開表示や投影像表示を行うことができる。ボリュームレンダリング法、MPR 処理、最大値投影、最小値投影、リフォーマット処理がある。
計測処理機能	画像データが有する画素値や位置情報を用いた基本的な計測処理機能。各処理機能を組み合わせることもできる。 距離、角度、面積、体積、画素値の平均値や標準偏差、画素値表示(数値、プロファイル、ヒストグラム)がある。
CT/MRI フュ ージョン	CT 画像と MRI 画像の重ね合わせ表示を 行う。
コロノグラフィ	大腸を内視鏡で観察するような三次元 画像の連続表示を行う。
パフュージョン	造影撮影された一連の CT 画像を用い、その画像上の指定部位の CT 値 (信号) の時間変化をトレースすることで、血流に関する情報を測定する機能である。血流情報からファンクショナルカラーマップを作成し表示する。

作動・動作原理

CT、MRI またはこれらの画像を保管しているサーバーから画像を受信し、診療のために表示する。

解析結果を保存することができる。 画像等の情報は DICOM 規格に準拠している。 接続例: 汎用 IT 機器は「使用方法」欄に 記載した仕様を満たすものであること。

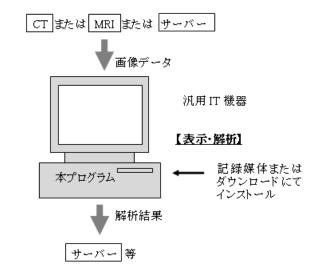

【使用目的又は効果】

画像診断装置等から提供された人体の画像情報をコンピュータ処理し、処理後の画像情報を診療のために提供すること。

【使用方法等】

本プログラムを使用するにあたり、本プログラムのインストール先の機器付属の取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

設置方法

本品目は、下記の仕様を満たす汎用 IT 機器に製造販売業者が指定した方法でインストールして使用する。汎用 IT 機器は、患者環境外に設置する。

汎用 IT 機器の仕様

インストール可能な汎用 ${
m PC}$ 及び組み合わせる画像表示モニタ

安全性: JIS C 6950-1 適合

EMC: CISPR 22/CISPR 24、または VCCI 適合

汎用 PC 性能

OS : OOO

HDD(空き容量):〇〇〇MB 以上

メモリ:OOOMB以上

画像表示モニタ:

解像度〇〇〇×〇〇〇ピクセル以上、

輝度〇〇cd/m²以上

諧調

カラー表示

汎用 IT 機器の推奨モデル 〇〇社モデル ABC

使用方法

- 1. 使用準備
- (1) インストール先の機器の電源を入れる。
- (2) 本プログラムを起動する。
- 2. 操作
- (1) 画像データを取得する。
- (2) 機能を選択する。
- (3) 三次元画像表示等を行う。
- (4) 結果を保存する。
- 3. 終了
- (1) 画面上の終了アイコンをクリックするかあるいはメニュー項目から終了機能を選択し本プログラムを終了させる。
- (2) 必要に応じて電源を切る。

操作方法の詳細については、本プログラムの取扱説明書を 参照すること。

【使用上の注意】

使用注意

- 1. ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュータウイルス及び情報の漏洩等に注意すること。
- 2. プログラムの同時使用・・・・・注意すること。

重要な基本的注意

推奨仕様を満たす機器にインストールすること。

【取扱い上の注意】

- 1. ダウンロードしたプログラムの法定表示は、本プログラムの起動時処理中に表示される。または、ファンクションキー〇〇を押すことによって画面上に表示される。
- 2. ダウンロードしたプログラムには梱包箱等がありませんので、標準バーコード(GS1/JAN コード)の表示は表示されていませんので、必要な場合は下記の連絡先に問い合わせること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

自己点検プログラムが起動する場合は、問題がなきことを確認してから、使用すること。

業者による保守点検事項

リモートメンテナスによる点検を行う場合は、JESRA TR-0036「画像診断装置等のリモートメンテナンスに関するガイドライン」を参照すること。

【主要文献及び文献請求先】

主要文献

0000

文献請求先

0000

東京都〇〇〇〇

電話番号〇〇〇〇

Fax 番号 OOOO

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

医用画像システム株式会社

TEL 03-+++-++

製造業者

医用画像システム株式会社 飯田橋製作所 連絡先

医用画像システム株式会社 飯田橋営業所 TEL 03-++++-++++

取扱説明書を必ずご参照ください。

医療機器プログラムの製造販売認証申請書添付資料の記載事例

(注意)

- ・ 当該記載事例は、あくまでも例示であり、申請する医療機器の特性に応じて 必要な事項を記載すること。
- ・ 平成27年3月31日までに受け付けられる製造販売認証申請について、当該記載事例を参考として差し支えないこと。

類 別:プログラム1 疾病診断用プログラム

一般的名称:汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム

 $(\neg - F : 70030012)$

販売名「画像解析ソフトウェア BP-2015」 指定管理医療機器製造販売認証申請書 添付資料

目 次

1	. 品目の総括	1
	1.1 品目の概要	
	1.2 外国における不具合の発生状況	2
2	2. 基本要件と基本要件への適合性	3
	2.1 参照規格一覧	3
	2.2 基本要件及び適合性証拠	
3		
	3.1 一般情報	16
	3.1.1 一般的名称に該当していることの説明	16
	3.1.2 「使用目的又は効果」が認証基準に適合していることの説明	
	3.1.3 認証基準の「ただし書き」に該当しないことの説明	
	3.1.4 付帯機能が認証基準の範囲内であることの説明	17
	3.1.5 医薬品医療機器等第42条第2項に基づく基準に適合していることの説明	
	3.2 原材料	18
	3.2 原材料 原材料 3.3 性能及び安全性に関する規格 1.3 性能及び安全性に関する規格	18
	3.4 類似医療機器との比較	19
4	. 設計検証及び妥当性確認文書の要約	20
	4.1 基本要件への適合性	20
	4.1.1 規格への適合宣言	20
	4.2 基本要件に適合することを示すために用いた規格への適合性	20
	4.2.1 安定性及び耐久性	
	4.3 適合性認証基準に適合することを証明する資料	20
5	5.表示物	22
	5. 表示物	22
	5.2 ラベル(案)	22
	5.3 適合性認証基準において引用する JIS における要求事項への適合性	22
6	i. リスク分析	
	6.1 実施状況	23
	6.1.1 組織体制、SOP に関する事項 ····································	23
	6.1.2 実施状況	23
	6.2 リスク分析における重要なハザード及びリスク低減措置	23
7	'. 製造に関する情報····································	······ 24
	7.1 製造工程と製造施設に関する情報	······ 24
	7.1.1 製造工程	
	7.1.2 製造所に関する情報	······ 24
	7.2 滅菌方法に関する情報	······ 24
	7.3 品質管理に関する情報	······ 24

略号一覧

略号又は略称	内容
DICOM	Digital Imaging and COmmunications in Medicineの略。「医用デジタル画像と通信」に関する標準規格。
MPR	MultiPlanar Reconstructionの略。多断面変換再構成のこと。
ROI	Region Of Interestの略。関心領域のこと。

1. 品目の総括

1.1 品目の概要

1		類別	プログラム 1 疾病診断用プログラム
2	名	一般的名称	汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム (コード:70030012)
	称	販売名	画像解析ソフトウェア BP-2015
3	3	クラス分類	П
4		申請者名	医用画像システム株式会社
5		使用目的 又は効果	認証申請書の「使用目的、又は効果」欄に記載のとおり。
6	7	構造•原理	認証申請書の「形状、構造及び原理」欄に記載のとおり。
7		使用方法	認証申請書の「使用方法」欄に記載のとおり。
8		備考	申請年月日: 平成 26 年○月○日 申請区分: なし 新規性の説明: 新規性なし

外観写真:非該当

【考え方】

記録媒体での販売の有無に関わらず、「外観写真:非該当」と記載する。

1.2 外国における不具合の発生状況

外国における販売実績はあるが、重篤な不具合の発生は報告されていない。

【考え方】

製品により適切に記載すること。

外国で販売されてない場合は、販売されていない旨を記載する。 また、販売されている場合で、重篤な不具合発生のある場合はその概要を適切に記載する。

国/地域名	不具合の種類	発現件数	発現頻度
0000国			

2. 基本要件と基本要件への適合性

2.1 参照規格一覧

基本要件への適合性を示すために用いた規格

JIS T 14971:2012 医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用

JIS C 6950-1:2012 情報技術機器-安全性-第1部:一般要求事項

DICOM OOO

【考え方】

基本要件への適合性チェックリストは行政通知されていないため、ここでは、適合性を示すために用いた記載等を記載する。

2.2 基本要件及び適合性証拠

基本要件への適合性確認

第一章 一般的要求事項

基本要件 改正案	当該機 器への 適用・ 不適用	適合の方法	特定文書の確認	該当する社 内文書番号 等
(設計)				
第一条 医療機器 (専ら動物のために使用 されることが目的とさ、当該医療機器 (専ら動物のためのを とないでは、当該医療機器を といる療機とは、当該になび、当該になび、当該になび、自然を では、必ずに、大び、自然を では、必ずに、大び、自然を では、必ずに、大び、自然を では、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	適用	認知された基準に適合することを示す。 認知された規格に従ってリスク管理が計	医療機器及び体外診 所用で品質を のの理理に関する。 では、16年厚生労働省 で第 169 号) JIS T 14971:「医療 機器一リの医療機器への が適用」	「4.1.1規格 への適合宣言書」 本添付資料 6.リスク
ならない。				
(リスクマネジメント)	•			
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に	適用	ってリスク管理が計	JIS T 14971:「医療 機器-リスクマネジ メントの医療機器へ	6. リスク

t man and a second seco				
立脚して医療機器の安全性を確保しなけ		ことを示す。	の適用」	1
ればならない。危険性の低減が要求され				
る場合、製造販売業者等は各危害につい				
ての残存する危険性が許容される範囲内				
にあると判断されるように危険性を管理				
しなければならない。この場合におい				
て、製造販売業者等は次の各号に掲げる				
事項を当該各号の順序に従い、危険性の				
管理に適用しなければならない。				
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意				
図された使用方法及び予測し得る誤使用				
に起因する危険性を評価すること。				
二 前号により評価された危険性を本質的				
な安全設計及び製造を通じて、合理的に				
実行可能な限り除去すること。				
大口可能な成りがムすること。				
一 ジョンサックを吹出ったよう				
三前号に基づく危険性の除去を行った後				
に残存する危険性を適切な防護手段(警				
報装置を含む。)により、合理的に実行				
可能な限り低減すること。				
四 第二号に基づく危険性の除去を行った				
後に残存する危険性を示すこと。				
(医療機器の性能及び機能)	•	•		
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意	適用	亜北頂日な句合する	医療機器及び体外診	未泺什次到
	週用			
図する性能を発揮できなければならず、			断用医薬品の製造管	
医療機器としての機能を発揮できるよう		合することを示す。	理及び品質管理の基	
設計及び製造されなければならない。			準に関する省令(平	言書」
			成 16 年厚生労働省	
			令第 169 号)	
(製品の有効期間又は耐用期間)				
第四条 製造販売業者等が設定した医療機	l			
/	適用	要求項目を包含する	医療機器及び体外診	本添付資料
男の製品の有効期間マけ耐田期間内にお	適用		医療機器及び体外診断用医薬品の製造管	
器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が制造販売業者等の場	適用	認知された基準に適	断用医薬品の製造管	「4.1.1 規格
いて当該医療機器が製造販売業者等の指	適用	認知された基準に適	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基	「4.1.1 規格 への適合宣
いて当該医療機器が製造販売業者等の指 示に従って、通常の使用条件の下で発生	適用	認知された基準に適	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平	「4.1.1 規格 への適合宣
いて当該医療機器が製造販売業者等の指 示に従って、通常の使用条件の下で発生 しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者	適用	認知された基準に適	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平 成 16 年厚生労働省	「4.1.1 規格 への適合宣
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合	適用	認知された基準に適	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平	「4.1.1 規格 への適合宣
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、	適用	認知された基準に適合することを示す。	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平 成 16 年厚生労働省 令第 169 号)	「4.1.1 規格 への適合宣 言書」
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅か	適用	認知された基準に適合することを示す。 認知された規格に従	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平 成 16 年厚生労働省 令第 169 号) JIS T 14971:「医療	「4.1.1 規格 への適合宣 言書」 本添付資料
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等によ	適用	認知された基準に適合することを示す。 認知された規格に従ってリスク管理が計	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平 成 16 年厚生労働省 令第 169 号) JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ	「4.1.1 規格 への適合宣 言書」 本添付資料 6. リスク
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅か	適用	認知された基準に適合することを示す。 認知された規格に従ってリスク管理が計	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平 成 16 年厚生労働省 令第 169 号) JIS T 14971:「医療	「4.1.1 規格 への適合宣 言書」 本添付資料 6. リスク
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等によ	適用	認知された基準に適合することを示す。 認知された規格に従ってリスク管理が計	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平 成 16 年厚生労働省 令第 169 号) JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ	「4.1.1 規格 への適合宣 言書」 本添付資料 6. リスク
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。	適用	認知された基準に適合することを示す。 認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されている	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平 成 16 年厚生労働省 令第 169 号) JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ メントの医療機器へ	「4.1.1 規格 への適合宣 言書」 本添付資料 6. リスク マネジメン
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等)		認知された基準に適合することを示す。 認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されて ことを示す。	断用医薬品の製造管 理及び品質管理の基 準に関する省令(平 成 16 年厚生労働省 令第 169 号) JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ メントの医療機器へ の適用」	「4.1.1 規格 への適合 言書」 本添付資料 6. ネジメン ト
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指	適用	認知された基準に適合することを示す。 認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されてしまかることを示す。 要求項目を包含する	断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器への適用」 医療機器及び体外診	「4.1.1 規格 への適合 言書」 本添付資料 6. ジメン ト
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び		認知された基準に適合することを示す。 認知された内に 認知されたので 関本で を で で で で で で で で で で を で で で で で で で	断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成 16 年厚生労働省令第 169 号) JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器といるの適用」 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管	「4.1.1 規格 への適言書」 本6.ネリジメト 本系イント 本系1.1 規格
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等らない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使		認知された基準に適合することを示す。 認知された内に 認知されたので 関本で を で で で で で で で で で で を で で で で で で で	断用医薬品の製造管理及び品質管理の(平成 16 年厚生労働省令(平成 16 年厚生労働省令第 169 号) JIS T 14971:「医療機器ーリスクを機器ーリスクを機器といる適用」 医療機器及び体外診断用医薬品質管理のびよりでは、対している。	「4.1.1 規格 へ言書」 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等らない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性		認知された基準に適合することを示す。 認知された内に 認知されたので 関本で を で で で で で で で で で で を で で で で で で で	断用医薬品の製造管理及び品質管理の(平成16年厚生労働省令(平成16年厚生労働省令第169号) JIS T 14971:「医療機器ーリスク療機器ーリスク療機器といる適用」 医療機器及び体外管理及び体外で関連の関連に関する省令(平	「4.1.1 規格 へ言書」 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下売業者等のを受け、かつ、製造販売業者等の指等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等らる悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及で保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装		認知された基準に適合することを示す。 認知された内に 認知されたので 関本で を で で で で で で で で で で を で で で で で で で	断用医薬品の製造管理及び品質管理の(平成 16 年厚生労働省令第 169 号) JIS T 14971:「医療機器レルの適用」 医療機器及び体外造ので、の適用」 医療機器及び体外造ので、関する省令(省)を表現ので、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して	「4.1.1 規格 へ言書」 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等らない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性		認知された基準に適合することを示す。 認知された内に 認知されたので 関本で を で で で で で で で で で で を で で で で で で で	断用医薬品の製造管理及び品質管理の(平成16年厚生労働省令(平成16年厚生労働省令第169号) JIS T 14971:「医療機器ーリスク療機器ーリスク療機器といる適用」 医療機器及び体外管理及び体外で関連の関連に関する省令(平	「4.1.1 規格 へ言書」 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下売業者等のを受け、かつ、製造販売業者等の指等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等らる悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及で保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装		認知された基準に適合することを示す。 認知された内に 認知されたので 関本で を で で で で で で で で で で を で で で で で で で	断用医薬品の製造管理及び品質管理の(平成 16 年厚生労働省令第 169 号) JIS T 14971:「医療機器レルの適用」 医療機器及び体外造ので、の適用」 医療機器及び体外造ので、関する省令(省)を表現ので、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して	「4.1.1 規格 へ言書」 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト 本6.ネト
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下売業者等のを受け、かつ、製造販売業者等の指等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等らる悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及で保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装		認知された基準に をすることを を対して を対して を対して を対して を対して を対して を対して を対して ではます。 を対して ではます。 ではまする。 ではます。 ではなます。 ではなます。 ではな。 ではな。 ではな。 ではな。 ではな。 ではなな。 ではな。 ではなな。 ではな。 ではなな。 では	断用医薬品の製造管理及び品質管理の(平成 16 年厚生労働省令第 169 号) JIS T 14971:「医療機器レルの適用」 医療機器及び体外造ので、の適用」 医療機器及び体外造ので、関する省令(省)を表現ので、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して	「4.1.1 規格 の書」 本 6.ネト 本 6.ネト 本 6.ネト 本 6.ネト 本 6.ネト 本 6.ネト 本 1.1 適 質 規 宣 料 ク ン 料 格 に 計 2.1 音
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下売業者等のを受け、かつ、製造販売業者等の指等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等らる悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及で保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装		認知された基準に 認知されたとを 和たとを にがい を対して を対して を対して を対して を対して では では では では では では では では では では	断用医薬品の製造管理の(平成 16 年厚子) JIS T 14971:「医療 169 号) JIS T 14971:「医療 大の適用」 医療機 薬品質省令 (本の 16 年厚子) が 大の で 大の	「4.1.1 規格 へ言 本 6.ネ 本 6.ネ 本 6.ネ 本 6.ネ 本 6.ネ 本 6.ネ 本 6.ネ 本 6.ネ か 資 規 宣 本 6.3 か 音 か 音 り が る の 書 り で 4.1.3 の 書 り で 4.1.3 の 書 り で 4.1.3 の 者 り で 4.1.3 の 書 り で 4.1.3 の 者 り で 5.1.3 の る り で 5.1.3 の を
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下売業者等のを受け、かつ、製造販売業者等の指等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等らる悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及で保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装		認知されたとを 認知さることを を がは、 を がは、 を を がいで、 を を を がいで、 を を で で で で で で で で で で で で で	断用医薬品の製造管理の(平成 16 年厚子) JIS T 14971:「マ機器 下型 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	「4.1.1 規格 「4.1.1
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下売業者等のを受け、かつ、製造販売業者等の指等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等らる悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及で保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装		認知さる	断用医薬品の質量では 理及に関する省の で第 169 号) JIS T 14971:「マ機器で の適用」 医療用医で が開発を が関連には のので が関連には のので を解析を が関連には のので のので のので のので のので のので のので のの	「4.1.11合 本6マト 本6マト 本6マト 本6マト 本6マト 本7年 本6マト 本6マト 本6マト 本7年 本6マト 本6マト 本6マト
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の販売業者等発生しうる負荷を受け、かつ、製造に保守された患者等の指定の特性及び性能は、患者の性性のではない。との情報を受けるものであってはならない。(輸送及び保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及で保管され、かつだいで利力といい。というにおいて、その特性及びもいいのではいよう設計、製造及び包装されていなければならない。		認知されたとを 認知さることを を がは、 を がは、 を を がいで、 を を を がいで、 を を で で で で で で で で で で で で で	断用医薬品の製造管理の(平成 16 年厚子) JIS T 14971:「マ機器 下型 で で で で で で で で で で で で で で で で で で	「4.1.1 規名 (A.1.1 適) (A.1.1 適) (A.1.1 適) (A.1.1 適) (A.1.1 道) (A.1.1 道) (A.1
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の販売業者等発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者合に、医療機器の特性及び性能は、患者の指す者を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及で保管等)第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下の財活とで使用された場合において、その特性及びされた場合においまう設計、製造及び包装されていなければならない。	適用	認知さることを 認知であることを を がは、 がは、 がは、 を では、 を では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	断用医薬品の製造管理の(省) (16年) (17年) (「4.1.1 (A) 1 (A) 1 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A) 3 (A) 3 (A) 4 (A)
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅よる悪影響を受けるものであってはならない。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従う意図に変れた使用方法で輸送及で保管され、かつ意図とれた使用方法ではおいて、その特性及び急にが低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。 (医療機器の有効性) 第六条 医療機器の既知又は予測すること		認知さる 認知の画こ 要認合 認の画こ と ボカー はいい まを 現にす を	断用医薬品の関連では、16年間では、16年間では、16年間では、16年間では、16年間では、16年間では、16年間では、16年間では、17年	「4.1.11合本6マト本 「へ言本6マト本 「へ言本 の書添 . ネがられるがりがられるがりがられるがりがられるがりがられるからなります。本 6 マト本 6 マト本 6 マト本 6 マト本 6 マト本 6 マト
いて当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者の特性及び等を全をである程度に劣化等を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならい。 (輸送及び保管等) 第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合においまう設計、製造及び包装されていなければならない。 (医療機器の有効性)	適用	認知さる 認知の画こ 要認合 認の画こ と ボカー はいい まを 現にす を	断用医薬品の製造管理の(省) (16年) (17年) (「4.1.11合本6マト本 f へ 言本 f へ 言本 f マト本 f へ 言本 f マト本 f マト本 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

常の使用条件の下で、合理的に実行可能 な限り低減され、当該医療機器の意図さ れた有効性と比較した場合に受容できる	メントの医療機器への適用」	マネジメント
ものでなければならない。	以下の項目が設計仕様を満足することを示す。 (1) 画像や情報の処理機能 (2) 画像表示機能 (3) 外部装置との入出力機能	「4.2.2 機 器の性能に 関する資 料」

第二章 設計及び製造要求事項

(医康州里西瓜产的桂州族)			1
(医療機器の化学的特性等)	1	Γ	
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。			
一 毒性及び可燃性	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。	
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液と の間の適合性	不適用	同上	
三 硬度、摩耗及び疲労度等	不適用	同上	/
れることが目的とされている医療機器の うち、人の身体に直接使用されることの ないものをいう。以下同じ。)は、必要 に応じ、当該分析機器等に使用材料と検 体及び分析の対象となる物(生体組織、 細胞、体液、微生物等を含む。)との間 の不適合により生じる性能の低下を考慮 し、設計及び製造されていなければなら ない。	不適用	分析機器関係の要求であり不適用。	
該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。	不適用)	汚染物質等を考慮 しなければならな い医療機器ではな い。	
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又は射力スと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。	不適用	通常の使用手順の中で物質及びガスと同時に使用することを意図した機器ではない。	

5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。		医薬品を含有する機器ではない。	
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。		物質を含む機器で はない。	
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。	不適用	物質が侵入又は浸出する機器ではない。	
(微生物汚染等の防止)			1
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造 工程は、患者、使用者及び第三者(当該 医療機器の使用と当たって感染の危険性同 じ。)に当たる感染におある場合に限る。以下にの条におある場合の危険性を、合理的にする。 合、これらの危険性を、又は低減すること。 一 取扱いを容易にすること。 一 取扱いを容易にすること。 一 必要に応じ、使用中の医療機器はいる。 一 必要に応じ、使用中の医療機器といる。 一 必要に応じ、使用中の医療機器を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 三 必要に応じ、患者、使用者及び第 生物汚染を防止すること。	不適用	感染及び微生物汚染の危険性がある機器ではない。	
2 医療機器に組み込まれた動物由来組織 織、細胞及び物質(以下「動物由来組織等」という。)は、当該動物由来組織等 の使用目的に応じて獣医学的に管理及び 監視された動物から採取されなければならない。製造販売業者等は、動物由するは は、動物由来組織等の原産地に関する 最等を採取した動物由来組織等の処理、 は、動物由来組織等の処理、 は、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	不適用	動物由来組織等の 原料又は材料を組 み入れた機器では ない。	

	1	T	
図ることにより安全性を確保しなければならない。ただし、分析機器等であって、使用に当たりウイルスその他の感染性病原体が必要なもの又はそれらの除去若しくは不活化により性能が低下するものについては、この限りでない。			
3 医療機器に組み込まれたヒトト 無無に組み込まれたヒトトートートーー にいりでは、 にいりではいいでは、 をでいるでは、 に当めて、 にいるでのに、 に当めて、 に当いて、 に当いて、 にいるでは、 にいるでいる。 にいるでは、 にいるでいる。 にいるでは、 にいるでいる。 にいるでいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいる。 にいるでいるでいる。 にいるでいるでいる。 にいるでいるでいるでいるでいる。 にいるでいるでいるでいるでいるでいるでいるでいるでいるでいるでいるでいるでいるでい	不適用	ヒト由来組織等の原料又は材料を組み入れた機器ではない。	
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来保存、出胞及び物質をいう。)の処理、保存用で、といるでは、で、、といるでは、ないでは、のについては、この限りでない。	不適用	微生物由来組織等 の原料又は材料を 組み入れた機器以 外は不適用	
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。	不適用	特別な微生物学的 状態にある機器で はない。	
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。	不適用	滅菌状態で出荷される機器ではない。	
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にある ことを表示した医療機器は、妥当性が確 認されている適切な方法により滅菌又は	不適用	滅菌又は特別な微 生物学的状態にあ る機器ではない。	

	1	1	1	
特別な微生物学的状態にするための処理				
が行われた上で製造され、必要に応じて				
滅菌されていなければならない。				
8 滅菌を施さなければならない医療機器	不適用	滅菌を施さなけれ		
は、適切に管理された状態で製造されな		ばならない機器で		
ければならない。		はない。		
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機	不適用	使用前に滅菌を施	/	/
器の品質を落とさないよう所定の清浄度		さなければならな		
を維持するものでなければならない。使		い機器ではない。		
用前に滅菌を施さなければならない医療				
機器の包装は、微生物汚染の危険性を最				
小限に抑え得るようなものでなければな				
らない。この場合の包装は、滅菌方法を				
考慮した適切なものでなければならな				
ν _°				
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌	不適用	滅菌及び非滅菌の		
の両方の状態で販売される場合、両者		両方の状態で販売		
は、包装及びラベルによってそれぞれが		される機器ではな		
区別できるようにしなければならない。		V √°		
(使用環境に対する配慮)				
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外	適用	認知された規格に	JIS T 14971: 「医療	本添付資料
診断用医薬品その他の装置等と併用され	/14	従ってリスク管理	機器ーリスクマネジ	
る場合は、当該医療機器と当該装置等が		が計画・実施され	メントの医療機器へ	
安全に接続され、かつ、当該併用により		ていることを示	の適用」	
当該医療機器及び当該装置等の性能が損		す。	~ ~27,143	
なわれないようにしなければならない。				
		認知された規格の	【DICOM 規格適用の	文書番号:
		該当する項目に適	場合】	AF-0001
		合することを示	DICOM 規格	
		す。	(Digital Imaging	
			and Communication	
			in Medicine)	
2 前項の場合の使用上の制限事項は、医	適用	認知された規格・	医療機器の添付文書	本添付資料
療機器に添付する文書又はその容器若し		基準の該当する項	の記載要領の改正に	
くは被包(第十七条において「添付文書		目に適合すること	ついて(薬食発	文書(案)」
等」という。)に記載されていなければ		を示す。	1002 第 8 号: 平成 26	
ならない。			年10月2日)	
3 医療機器は、使用者が操作する液体又	不適用	使用者が操作する		
はガスの移送のための接続部又は機械的		液体又はガスの移		
に結合される接続部について、不適切な		送のための接続部		
接続から生じる危険性を最小限に抑えら		又は機械的に結合		
れるよう、設計及び製造されていなけれ		される接続部があ		
ばならない。		る機器ではない。		
4 医療機器は、その使用に当たって患				
者、使用者及び第三者(医療機器の使用				
に当たって次の各号に掲げる危険性があ				
る者に限る。)に生じる次の各号に掲げ				
る危険性が、合理的かつ適切に除去又は				
低減されるように設計及び製造されなけ				
ればならない。				
		#		
一物理的及び人間工学的特性に関連	不適用	物理的な危害を与		
した傷害の危険性		える機器ではない		
	1			
	L	am to (a) > 1 € 17		
二 医療機器の意図された使用目的に	適用	認知された規格の	JIS T 14971: 「医療	
二 医療機器の意図された使用目的に おける人間工学的特性、人的要因及び その使用環境に起因した誤使用の危険	適用	認知された規格の 該当する項目に適 合することを示	JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器へ	6. リスク

性		す。	の適用」	7
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性	不適用	通常の使用状態で 材料、物質及びガ スが接触する機器 ではない。		
四 通常の使用条件の下で、曝(ば く)露された物質、液体又はガスと接 触して使用することに関連する危険性	不適用	通常の使用状態で 材料、物質及びガ スが接触する機器 ではない。		
五 プログラムと当該プログラムの実 行環境との間で発生しうる干渉に関連 する危険性	適用	認知された規格の 該当する項目に適 合することを示 す。	JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ メントの医療機器へ の適用」	6. リスク
六 物質が偶然に医療機器に侵入する 危険性	不適用	物質が侵入する機 器ではない。		
七 検体を誤認する危険性	不適用	検体を取り扱う機 器ではない。		
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性	不適用	通常使用される他 の機器と電磁的干 渉以外の相互干渉 が生じる機器では ない。		
九 保守又は較正が不可能な場合、使 用材料が劣化する場合又は測定若しく は制御の機構の精度が低下する場合な どに発生する危険性	不適用	保守又は較正が可能な機器である。		
5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝(ばく)露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。	不適用	火災等を発生する 構造を持つ機器で ない。		
6 医療機器は、意図する性能を発揮する ために必要な調整、較正及び保守が安全 に実施できるよう設計及び製造されてい なければならない。	適用	認知された規格の 該当する項目に適 合することを示 す。	JIS T 14971: 「医療 機器ーリスクマネジ メントの医療機器へ の適用」	6. リスク
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な 処理を容易にできるように設計及び製造 されていなければならない。	不適用	記録媒体がある場合でも、通常の廃棄物をして処理できる機器である。		
(測定又は診断機能に対する配慮)				
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定	適用 (該当 する場 合)	認知された規格の 該当する項目に適 合することを示 す。	JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ メントの医療機器へ の適用」	6. リスク
	•	•		

				1
性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。				
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。		分析機器関係の要求であり不適用。		
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。	不適用	分析機器関係の要 求であり不適用。		
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。	適用	従ってリスク管理 が計画・実施され	JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ メントの医療機器へ の適用」	6. リスク
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。	適用		JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ メントの医療機器へ の適用」	6. リスク
(放射線に対する防御)				
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために、適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝(ばく)の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝(ばく)が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。		機器ではない。		
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝(ばく)の危険性がある者に限る。)への放射線被曝(ばく)が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。	不適用	分析機器関係の要求であり不適用。		
3 医療機器の放射線出力について、医療 上その有用性が放射線の照射に伴う危険 性を上回ると判断される特定の医療目的 のために、障害発生の恐れ又は潜在的な 危害が生じる水準の可視又は不可視の放	不適用	放射線を照射する 機器ではない。		

		.		
射線が照射されるよう設計されている場合にないては、約号が使用者によって制				
合においては、線量が使用者によって制 御できるように設計されていなければな				
らない。当該医療機器は、関連する可変				
パラメータの許容される公差内で再現性				
が保証されるよう設計及び製造されてい				
なければならない。				
4 医療機器が、障害発生のおそれがある	不適用	放射線を照射する		
水準又は潜在的な危害が生じる水準の可		機器ではない。		
視又は不可視の放射線を照射する場合に				
は、照射を確認するための視覚的表示又				
は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限				
り具備していなければならない。		N 15 10 HI HI H		
	<u></u> 个適用	分析機器関係の要		
及び線量を合理的に実行可能な限り適切 に制御又は調整できるよう、設計及び製		求であり不適用。		
に前脚又は調整できるよう、設計及い製 造されていなければならない。				
6 医療機器は、意図しない二次放射線又	不適田	お射線を昭射する		
は散乱線による患者、使用者及び第三者		機器ではない。		
への被曝(ばく)を、合理的に実行可能な		INWHH CIO.O.		
限り低減するよう設計及び製造されてい				
なければならない。				
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明	不適用	放射線を照射する		
書には、照射する放射線の性質、患者及		機器ではない。		
び使用者に対する防護手段、誤使用の防				
止法並びに据付中の固有の危険性の排除				
方法について、詳細な情報が記載されて				
いなければならない。		- harring		
8 電離放射線を照射する医療機器は、合	不適用	電離放射線を照射		
理的に実行可能な限り、その使用目的に 照らして、照射する放射線の線量、幾何		する機器ではな		
学的及びエネルギー分布又は線質を変更		V ν _o		
及び制御できるよう、設計及び製造され				
なければならない。				
9 電離放射線を照射する診断用医療機器	不適用	電離放射線を照射		
は、患者及び使用者の電離放射線の被曝		する機器ではな		
を最小限に抑え、所定の診断目的を達成		ر ۲ _°		
するため、適切な画像又は出力信号の質				
を高めるよう設計及び製造されていなけ				
ればならない。				
10 電離放射線を照射する治療用医療機器	不適用	電離放射線を照射		
は、照射すべき線量、ビームの種類及び		する機器ではな		
エネルギー並びに必要に応じ、放射線ビ		ν _°		
ームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製				
造されていなければならない。				/
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮	I 計)	<u> </u>	V	V
第十二条 プログラムを用いた医療機器		要求項目を包含す	医療機器及び体外診	未 活什次率
第十二条 ノログブムを用いた医療機器 (医療機器プログラム又はこれを記録し	週川		医療機器及び体外診断用医薬品の製造管	
た記録媒体たる医療機器を含む。以下同			理及び品質管理の基	
じ。)は、その使用目的に照らし、シス		示す。	準に関する省令(平	
テムの再現性、信頼性及び性能が確保さ		, ,	成 16 年厚生労働省	
れるよう設計されていなければならな			令第 169 号)	
い。また、システムに一つでも故障が発				
生した場合、当該故障から生じる可能性			JIS T 14971: 「医療	
がある危険性を、合理的に実行可能な限			機器ーリスクマネジ	
り除去又は低減できるよう、適切な手段		が計画・実施され	メントの医療機器へ	マネジメン


が講じられていなければならない。		ていることを示	の適用」	
ル・BHF C りなりく V・パより ないばなばなり な V 。		す。	~ ン YET \ 1	
2 プログラムを用いた医療機器について			JIS T 2304: 「医療	
は、最新の技術に基づく開発のライフサ				間につき、
イクル、リスクマネジメント並びに当該	'	ることを示す。	ソフトウェアライフ	適用外
医療機器を適切に動作させるための確認 及び検証の方法を考慮し、その品質及び			サイクルプロセス」	
性能についての検証が実施されていなけ		認知された規格に	JIS T 14971:「医療	
ればならない。			機器-リスクマネジ	
	で良	が計画・実施され	メントの医療機器へ	
	(()	ていることを示	の適用」	
	D) = +立 /==	す。	トッゴー歩)	
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器				ナエル次心
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型 医療機器に一つでも故障が発生した場			JIS T 14971: 「医療 機器-リスクマネジ	
合、当該故障から生じる可能性がある危		が計画・実施され	メントの医療機器へ	
険性を、合理的に実行可能な限り適切に		ていることを示	の適用」	1
除去又は低減できるよう、適切な手段が		す。		
講じられていなければならない。				
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、		内部電源を持つ機		
患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられて		器ではない。		
が いなければならない。				
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安	不適用	外部電源を持つ機		
全に直接影響を及ぼす場合、停電による	1 22/14	器ではない。		
電力供給不能を知らせる警報システムが				
内蔵されていなければならない。				
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモ	不適用	警報システムの構		
ニタに表示する医療機器は、患者が死亡 又は重篤な健康障害につながる状態に陥		造を持つ機器では ない。		
った場合、それを使用者に知らせる適切		/		
な警報システムが具備されていなければ				
ならない。				
5 医療機器は、通常の使用環境におい	不適用] /
て、当該医療機器又は他の製品の作動を		の機器と電磁的干		
損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを、合理的に実行可能な限り低減す		渉を生じる構造を 持つ機器ではな		
るよう、設計及び製造されていなければ		けっぽんではない。		
ならない。		. 0		
6 医療機器は、意図された方法で操作で	不適用	電磁的干渉を生じ		
きるために、電磁的妨害に対する十分な		る構造を持つ機器		
内在的耐性を維持するように設計及び製		ではない。		
造されていなければならない。	→ / 2 /- □	用が始にはまよっ		
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に 基づき正常に据付けられ、及び保守さ	小週用	偶発的に感電する 構造を持つ機器で		/
本づき正常に据りけられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医		はない。		
療機器に一つでも故障が発生した状態で				
使用される場合において、患者、使用者				
及び第三者(医療機器の使用に当たって				/
偶発的に感電するおそれがある者に限				/
る。)が偶発的に感電するおそれを合理 的に実行可能な限り防止できるよう、設				
計及び製造されていなければならない。				/
(機械的危険性に対する配慮)	1	1	v	y
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定	不適用	器械的な構造を持		
性及び可動部分に関連する機械的危険性		つ機器ではない。		
から、患者、使用者及び第三者(医療機				

		T	,	
器の使用に当たって機械的危険性がある 者に限る。以下この条において同じ。)				
を防護するよう設計及び製造されていなければならない。				
2 分析機器等は、可動部分に起因する危	不適用	分析機器関係の要		
険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出 に起因する危険性がある場合には、その		求であり不適用。		
危険を防止するための、適切な仕組みが				
組み込まれていなければならない。 3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能	不 , 本田	電割ぶがサナフ推		
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源に	个週用	震動が発生する構 造を持つ機器では		
おける振動抑制のための技術進歩や既存の世後に関する。		ない。		
の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に				
実行可能な限り最も低い水準に抑えられ るよう設計及び製造されていなければな				
らない。				
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能 の一つである場合を除き、特に発生源に	不適用	雑音が発生する構 造を持つ機器では		
おける雑音抑制のための技術進歩や既存		ない。		
の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的				
に実行可能な限り最も低い水準に抑える				
よう設計及び製造されていなければならない。				
5 使用者又は第三者が操作しなければな	不適用	電気等のエネルギ		
らない電気、ガス又は水圧式若しくは空 圧式のエネルギー源に接続する端末及び		ー源に接続する構造を持つ機器では		
接続部は、可能性のある全ての危険性が		ない。		
最小限に抑えられるよう、設計及び製造 されていなければならない。				
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続 することが意図されている特定部分の誤	不適用	使用中に接続等を 意図する構造を持		
接続の危険性について、合理的に実行可		息凶する構造を持つ機器ではない。		
能な限り最も低い水準に抑えられるよう 設計及び製造されていなければならな				
い。				
7 医療機器のうち容易に触れることので きる部分(意図的に加熱又は一定温度を	不適用	接触する部分を持つ機器ではない。		
維持する部分を除く。)及びその周辺部		ンが、		
は、通常の使用において、潜在的に危険 な温度に達することのないようにしなけ				
ればならない。				
(エネルギー又は物質を供給する医療機器		, 1		
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安	小週用	エネルギー又は物 質を患者に供給す		
全を保証するため、供給量の設定及び維 持ができるよう設計及び製造されていな		る機器ではない。		
ければならない。				
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある 不適正なエネルギー又は物質の供給を防	不適用	エネルギー又は物 質を患者に供給す		
止又は警告する手段が具備され、エネル		夏を思有に供給 9 る機器ではない。		
ギー源又は物質の供給源からの危険量の エネルギーや物質の偶発的な放出を可能				
な限り防止する適切な手段が講じられて				
いなければならない。 3 医療機器には、制御器及び表示器の機	不適用	エネルギーVけ物		/
□ 四次派和では、川州中旬及○次/小旬の/校	1 1000/11			

能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたって患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。		質を患者に供給する機器ではない。		
(一般使用者が使用することを意図した图	と 療機器	に対する配慮)		
第十六条 一般使用者が使用することを意図した医療機器(医療機器のうち、自己検査医療機器又は自己投薬医療機器その他のその使用に当たり専門的な知識を必ずしも有しない者が使用することを意図したものをいう。以下同じ。)は、当該医療機器の使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に対して適正に操作できるように設計及び製造されていなければならない。		することを意図した医療機器ではない。		
2 一般使用者が使用することを意図した 医療機器は、当該医療機器の使用、検体 の使用(検体を使用する当該医療機器に 限る。)及び検査結果の解釈に当たっ て、使用者が誤使用する危険性を合理的 に実行可能な限り低減するように設計及 び製造されていなければならない。		一般使用者が使用 することを意図し た医療機器ではな い。		
3 一般使用者が使用することを意図した 医療機器については、合理的に実行可能 な限り、製造販売業者等が意図したよう に機能することを使用者が検証できる手 順を定めておかなければならない。	不適用	一般使用者が使用 することを意図し た医療機器ではな い。		
(添付文書等による使用者への情報提供)				
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用		認知された規格の 該当する項目に適 合することを示 す。	医療機器の添付文書 の記載要領の改正に ついて(薬食発 1002 第8号:平成 26年 10月2日)	
者が容易に理解できるように提供しなければならない。		認知された規格に 従ってリスク管理 が計画・実施され ていることを示 す。	JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ メントの医療機器へ の適用」	6. リスク
(性能評価及び臨床試験)				
第十八条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。			医療機器の製造販売 認証申請について 第2の1別紙 (薬食発1120第8 号 平成26年11 月20日)	左記の通知 別紙2 に 適合する。
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。		臨床試験を必要と する機器ではな い。		

3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。

製造販売後の調査 及び試験を必要と する機器ではな い。

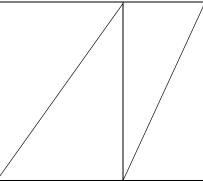

- プログラム医療機器には経過措置が適用されないため、新基本要件基準への適合が必要となる。
- ・本項に提示した基本要件への適合性確認の表は、あくまでも現時点で想定しうる事項を例示したものであり、申請においては、その品目の特性に基づき、当該機器への適用・不適用、適合の方法、特定文書の確認について、検討し適切に記載することが必須である。
- ・なお、プログラム医療機器の基本要件への適合においては、関連する有体物の認証基準として 通知された基本要件適合性チェックリスト及び基本要件基準の取扱いに関する通知(薬食機 参発第 1105 第 5 号平成 26 年 11 月 5 日)別添 1 を参考にすること。
- ・本記載事例としては、告示の基準として JIS C 6950-1 が指定されていることから、本申請対象 プログラムとして該当する項目を確認し、規格の要求事項のうち、プログラム医療機器としてなじ まない部分と、適用すべき部分を明確化する必要があり、適用すべき部分に対しては、試験結 果を添付する。
- ・この事例では、該当する項目がなかったため、IIS C 6950-1 に関する記載事項はない。

3. 機器に関する情報

3.1 一般情報

3.1.1 一般的名称に該当していることの説明

本品目は、下表のとおり、一般的名称「汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム」に該当していることを確認した。

「汎用画像診断装置ワークス テーション用プログラム」の 一般的名称の定義	汎用画像診断装置ワークステーションを構成するプログラムであり、得られた情報をさらに処理して診断等のために使用する医療機器プログラム。当該プログラムを記録した記録媒体を含む場合もある。
本品目の説明	本品目は、CT 及び MR の画像を用いて病態に係わる判断、評価 又は診断を行うための情報を提供する機能を有する。 従って本 品目は当該一般的名称の定義に該当している。

3.1.2 「使用目的又は効果」が認証基準に適合していることの説明

本品の使用目的、効能又は効果は、下表のとおり、一般的名称「汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム」の適合性認証基準に定められた使用目的、効能又は効果の範囲内にあることから、当該認証基準に適合することを確認した。

適合性認証基準に定められた 使用目的又は効果	本品目の使用目的又は効果
画像診断装置等から提供された人体の画像情報を 報をコンピュータ処理し、処理後の画像情報を 診療のために提供すること(自動診断機能を有するものを除く。)。	画像診断装置等から提供された人体の画像情報をコンピュータ処理し、処理後の画像情報を診療のために提供すること。

【考え方】

- ・当該プログラムに係る一般的名称の定義を参考にし、認証基準の「使用目的又は効果」の範囲内で適切に記載する。
- ・認証基準における「使用目的又は効果」は○○用プログラムの含まれている○○装置と同一に 設けられているが、一般的名称の定義にあるように「○○装置で得られた情報をさらに処理して 診断等のために使用する」ものであることに留意して説明すること。

医療機器プログラムの製造販売認証申請における取扱いについて(薬食機参発1125第6号 平成26年11月25日)通知の記「2,付帯的な機能の取扱について」によること。

2 付帯的な機能の取扱いについて

<略:

また、当該プログラムに係る一般的名称の定義を参考に使用目的又は効果を適合性認証基準の範囲内で適切に記載し、既存品目の基準適合性認証審査において評価されていない性能、使用目的等を記載することはできないことに留意すること。

3.1.3 認証基準の「ただし書き」に該当しないことの説明

本品目は、本添付資料 3.4 項に記載のとおり、既存の類似医療機器と同等であることから、認証 基準の「ただし書き」には該当しない。

3.1.4 付帯機能が認証基準の範囲内であることの説明

本品目の付帯機能は以下の通りであり、いずれも医療機器審査管理室長通知薬食機発 0630 第 5 号(平成 22 年 6 月 30 日)における「付帯的な機能リスト(核医学装置ワークステーション等)」の範囲内であることから、本医療機器プログラムにおいても同様に認証基準の範囲内である。

本申請品目の付帯機能 核医学装置ワークステーション等の付帯的な機能リスト					-tw pt-	
番号	機能 名称	機能定義	機能 名称	機能定義	参照先	考察
1	三次元画機能	一連の画像デースを三すの画像デースを三すの画像デースを示して、 これの また しい はい また しい はい また しい はい		一連の画像デ理は大型の画像が理まり、、大型の画像の一型を表三/の画像の理まりにたった。 では、大型の一型ででは、大型のでは、では、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、では、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、では、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、では、大型のでは、大型のでは、では、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、大型のでは、なりでは、では、では、大型のでは、では、大型のでは、大型のでは、では、では、では、では、では、では、大型では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で		範 囲 あ 。
2	計測処理機能	値や位置情報を用いた基本的な計測処理機能。 各処理機能を組み合わせることもできる。 距離、角度、面積、体積、画素値の平均値や標準偏差、画素値表示(数値、プロファイル、ヒストグラム)がある。	一 般 画 像 計 測 機能	画像データが表示を理機を位置計測を理機を位置計測を理機をののででででででできます。 例えた のののででででできます。 ののでは できない かっと は できない は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	る付帯的 な機能】 の No. 4	範 囲 内 で る。
3	CT/MR フュー ジョン	CT 画像と MR 画像の重ね合わせ表示を行う。	表が、理の機能	画像でジタル機会では、 を が が が が が が が が が が が が が	る付帯的 な機能】 の No. 5	範でる。
4	コロノ グラフ イ	大腸を内視鏡で観察する ような三次元画像の連続 表示を行う。	面およ	一連の CT 画像を任意断 面像や三次元画像に処理 し、表示する機能。主な	像診断装	

				処理としてサーフェース		
				/ボリュームレン ダリ	機能】の	
			能	ング法、最大値投影法、	別表番号	
				最小值投影法、任意断面	15 (部位	
				処理(MPR)などがあり、	限定X線	
				三次元画像データに対し	CT 診断装	
				視点変更、任意断面への	置等)の	
				展開表示や投影像表示な	No. 6	
				どの 機能を組合せるこ		
				ともある。適用例として		
				は、骨、臓器、血管、内		
				腔などの断面/立体/展		
				開表示や歯列に沿った曲		
				面表示(パノラミック像)		
				や気管支、血管、 消化		
				器等を内視鏡で観察する		
				ような三次元画像の連続		
				表示などがある。		
5	パフュ	造影撮影された一連の CT	血流情	造影撮影された一連の CT	【X線画	範囲内
	ージョ	画像を用い、その画像上	報測定	画像を用い、その画像上	像診断装	であ
	ン	の指定部位の CT 値(信	・表示	の指定部位の CT 値(信	置 WS の	る。
		号)の時間変化をトレー	機能	号)の時間変化をトレー	付帯的な	
		スすることで、血流に関		スすることで、血流に関	機能】の	
		する情報を測定する機能		する情報を測定する機	別表番号	
		である。 血流情報から		能。それらを画像の濃	15 (部位	
		ファンクショナルカラー		度情報に変換したファン	限定 X 線	
		マップを作成し表示す		クショナルマップを作成	CT 診断装	
		る。		し、表示することもあ	置等)の	
				る。灌流像解析	No. 1	
				(Perfusion)、CTパフ		
				ユージョン、Xenon		
				Study、血流解析とも呼		
				ばれる。		

【考え方】

「○○装置」の付帯機能が、医療機器プログラムの主機能となる場合、その機能ついては「3.4類似医療機器との比較」において同等性を説明する必要がある。この場合、○○装置用プログラムの申請の主機能となるため、付帯的機能の説明である本欄への記載は不要。

3.1.5 医薬品医療機器等第 42 条第 2 項に基づく基準に適合していることの説明

本品目に係る医薬品医療機器等法第42条第2項に基づく基準は規定されていないので、本項は該当しない。

3.2 原材料

医療機器プログラムであり記載不要である。

3.3 性能及び安全性に関する規格

認証申請書の「性能及び安全性に関する規格」欄に記載のとおり。

3.4 類似医療機器との比較

本品目は、表1とおり、既存の類似医療機器と同等である。

表1 全体の比較

衣 1 主体の礼事	本品目	類似医療機器	比較評価結果
類別		機械器具9 医療用エックス線装置及び 医療用エックス線装置用エックス線管	
一般的名称	汎用画像診断装置ワークス テーション用プログラム	汎用画像診断装置ワークス テーション	_
クラス分類	クラスⅡ	クラスⅡ	同一
販売名	画像解析ソフトウェア BP- 2015		_
製造販売業者名	医用画像システム株式会社	△△△△株式会社	_
認証番号	_	0000	_
認証認年月日		平成 25 年〇月〇日	
使用目的又は効果	画像診断装置等で収集され た画像や情報に対し、各種 処理を行い処理後の画像や 情報を表示し診療のために 提供すること。		同等(必要に応じて説明を追加)
形状、構造及び 原理	<構成> <動作原理> <機能> 表 2 参照		本品目はハードウェアを含まない点が類似医療機器と異なるが、ハードウェアにインストールした後に使用できる機能は類似医療機器と同等であるため、本質的な違いはない。
性能及び安全性に関する規格	<性能> <安全性> 		本品目はハードウェアを含まないため、安全性に関する規格を引用していない。 性能に関する項目は類似医療機器と同等であるため、本質的な違いはない。
使用方法	•••••	(類似医療機器の使用方法 の概要を記述する。)	本品目はプログラムのため事 前準備としてインストールを 必要とするが、その後の使用 方法は類似医療機器と同等 であるため、本質的な違いは ない。

類似医療機器の出典: 添付文書(平成△△年○○月○○日:第1版)

4. 設計検証及び妥当性確認文書の要約

4.1 基本要件への適合性

4.1.1 規格への適合宣言

別添資料1として、適合宣言書を添付する。

4.2 基本要件に適合することを示すために用いた規格への適合性

2.2 項 基本要件への適合性確認に記載のとおり。

4.2.1 安定性及び耐久性

医療機器プログラム及びその記録媒体であるため記載を省略する。

4.3 適合性認証基準に適合することを証明する資料

(1) 基本要件第6条への適合性を示す資料

以下のように適合性を確認した。

- 2/1 · 3 の 2 (- 20 日 主 C) 正					
第6条に規定 される項目	仕様	試験方法	試験 結果	資料番号	
画像や情報の	・反転(上下反転、左右反	サンプル画像を使用して正しく	適合	別添資料2	
処理機能	転)	動作することを確認する。			
	·回転				
	・拡大				
	•縮小				
	・階調処理・路動(こつ) いいこくが)				
	・移動(シフト、パンニング)				
画像表示機能	上記の「画像や情報の処理	サンプル画像を使用して正しく	適合	別添資料 2	
	機能」の処理結果の正しい	表示することを確認する。			
	表示				
外部装置との	本品目が、指定した外部装	サンプル画像を使用して各入	適合	別添資料 2	
入出力機能	置との間でデータの受送信	出力機能が正しく動作すること			
	を行うことができる。	を確認する。			

(2) JIS C 6950-1:2012 への適合性を示す資料

本医療機器プログラムは JIS C6950-1 の全ての要求事項が適用されないことを確認した。(別添資料3)。

【考え方】

別添資料 3 として、チェックリスト等の説明資料を添付するか、または必要に応じて認証機関の求めに応じて提出するかは検討が必要。

なお、認証基準で適合を求められる規格においては、医療機器プログラムとして適合が必要と なる項目があれば、ここで内容を説明する。

【経過措置期間中は不適用にでき、この扱いを採用するばあいは記載不要】

(3) JIS T 2304 の実施状況 組織体制、SOP に関する事項

	7-17(1) 114() 124 / 34 / 34				
	JIS T 2304 の確認項目	実施手順			
4	一般要求事項 (品質システムにより顧客要求事項 及び該当する規制要求事項に適合 する医療機器ソフトウェアを提供す る能力があることを実証し、JIS T 14971 に規定したリスクマネジメント	・品質マネジメントシステムとして、「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」を適用している。(社内文書○○) ・リスクマネジメントとして、JIS T 2304 に規定されるリスクマネジメントプロセスを適用している。			
	プロセスを適用する。)				
5	ソフトウェア開発プロセス〜ソフトウェ	・ソフトウェア開発プロセス〜ソフトウェア問題解決プロ			
~	ア問題解決プロセス	セスの各アクティビティについて、手順を社内文書に			
9		規定している。			

実施状況

	ብላይ <u>ር</u>	
	JIS T 2304 の確認項目	実施内容概要
4	一般要求事項	ソフトウェア安全クラスは(A、B
	品質システム及びリスクマネジメントプロセスに基づいて、ソ	又は C)とし、リスクマネジメント
	フトウェアシステムに起因する危害に応じてソフトウェア安全	ファイル(社内文書〇〇)に文
	クラス分類を行った。	書化した。
5	ソフトウェア開発プロセス	ソフトウェア開発プロセスの手
	ソフトウェア開発計画が適切に確立され、ソフトウェア要求	順に基づき、以下の通り文書化
	事項が定義され、最終的にリリースしているバージョンの文	した。
	書化が手順どおりに行われていることを確認し、ソフトウェア	・ソフトウェア開発計画書(社内
	リリースが適切に行われた。	文書〇〇)
		・ソフトウェア要求事項分析の
		文書化(社内文書〇〇)
		・リリースしているバージョンの
		文書化(社内文書〇〇)
6	ソフトウェア保守プロセス~ソフトウェア問題解決プロセス	各プロセスの手順に基づき、以
\sim	ソフトウェア保守プロセスにおいて、保守計画が確立され、	下の通り文書化した。
9	ソフトウェア問題解決プロセスとの関係を明確にした。	・ソフトウェア保守計画書(社内
	ソフトウェア構成管理プロセスにおいて、構成アイテムの識	文書〇〇)
	別手段を確立した。	・システム構成文書(社内文書
		00)

5. 表示物

5.1 添付文書(案)

- (1) 添付文書(案) 認証申請書別添「添付文書(案)」のとおり。
- (2) 引用した JIS に設定されている記載事項 JIS C 6950-1 の要求事項はプログラム医療機器には適用されないため記載を省略する。
- (3) リスク分析の結果 リスク分析の結果、添付文書(案)に反映させた事項は以下のとおり。

【あれば具体的に記載】

5.2 ラベル(案)

- (1) 医薬品医療機器等法第63条により、表示する項目は以下のとおり。
 - ① 記録媒体に表示するラベルに記載する。
 - ② プログラムに含め電磁的に提供する。

製造販売業者 : 医用画像システム株式会社

住所:東京都〇〇区〇〇

一般的名称 : 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム

販売名: 画像解析ソフトウェア BP-2015

製造番号 : ○○○○

管理医療機器

(2) 引用された JIS に設定されている表示 JIS C 6950-1 の要求事項はプログラム医療機器には適用されないため記載を省略する。

5.3 適合性認証基準において引用する JIS における要求事項への適合性

認証基準として適用される JIS C 6950-1 の要求事項は当医療機器プログラムにはないため記載を 省略する。

6. リスク分析

6.1 実施状況

本品目のリスクマネジメントは、主たる設計を行った事業者(〇〇〇〇)にて「JIS T 14971:2012 医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」に準じて実施されている。 実施状況は 6.1.1 項及び 6.1.2 項のとおり。

6.1.1 組織体制、SOP に関する事項

	JIS T 14971 の確認項目	実施手順
3	リスクマネジメントの一般的要求事項	・社内規定にてリスクマネジメントのプロセスを文書化
		し、リスクマネジメント実施計画と要員を規定している。
5	リスク評価	・リスクの判断基準は、リスクマネジメント実施計画に予
7	残留リスクの全体的な評価	め定められている。

6.1.2 実施状況

	JIS T 14971 の確認項目	実施内容概要
3	リスク分析実施メンバー	○○部門: (氏名)
		••••
4	リスク分析	あらかじめ規定した手順に従い
	あらかじめ規定したリスク分析手順に従がってリスク分析を	リスク分析を実施し、社内文書
	行い、実施及び結果を記録している。	○○に記録した。
	ハザードを特定し、ハザードごとにリスクを推定する。	
5	リスク評価	リスクマネジメント計画で定めた
	特定した各ハザードにおいて、リスクマネジメント計画で定	判断基準を用いてリスク評価を
	めた判断基準を用いて、推定したリスクが受容可能なレベ	実施し、社内文書〇〇に記録し
	ルであることを判断している。	た。
6	リスクコントロールの手段の選択と実施	リスクを低減する手段を選択し
	下記の一つ以上を用いて、リスクを受容可能レベルまで低	実施し、社内文書〇〇に記録し
	減している。	た。
	a) 設計による本質的な安全性の確保	
	b)製造工程中、又は医療機器本体にて防護策を講じる	
	c)安全に関する情報提供	
	残留リスクの評価	リスクマネジメント計画で定めた
	残留するリスクをリスクマネジメント計画にて定めた判断基準	判断基準を用いて残留リスク評
	を用いて評価している。	価を実施し、社内文書〇〇に記
		録した。
7	残留リスクの全体評価	設定した判断基準を用いて受
	設定した判断基準を用いて判定した結果、受容できないと	容できない残留リスクがないこと
	判定した場合は、医学的効用が全ての残留リスクを上回っ	を確認し、社内文書〇〇に記録
	ていることを確認する。	した。

6.2 リスク分析における重要なハザード及びリスク低減措置

厚生労働省等から安全対策上の対応を求められたハザード、及びその他の重要なハザードはない。

7. 製造に関する情報

7.1 製造工程と製造施設に関する情報

7.1.1 製造工程

プログラムを記録した記録媒体であるため記載を省略する。

【考え方】

プログラム医療機器には製造方法の記載が求められていないことから、記載不要とした。

7.1.2 製造所に関する情報

製造所の名称	登録番号	製造工程	
IMD, Inc	0000	設計	
医用画像システム株式会社	0000	最終製品の保管	

7.2 滅菌方法に関する情報

非該当(滅菌工程なし)

7.3 品質管理に関する情報

プログラムを記録した記録媒体であるため記載を省略する。

【考え方】

プログラム医療機器には組立て製造所登録が求められていないことから、記載不要とした。

番号

適合宣言書

本宣言書は、販売名『画像解析ソフトウェア BP-2015』を認証申請するにあたり、 製造販売する本品目が下記の基準に適合することを宣言する。

- 1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第四十 一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準 (平成十七年 厚生労働省告示 第百二十二号)
- 2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十 三条の二の二十三 第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する 医療機器(平成十七年 厚生労働省告示 第百十二号) 別表第二の888汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム
- 3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十四条 第二項 第四号及び第十九条の二 第五項において準用する第十四条 第二項 第四号の規定により厚生労働大臣が定める医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年 厚生労働省令第百六十九号)

平成〇〇年 月 日

住所 東京都〇〇〇〇 氏名 医用画像システム株式会社 代表取締役社長 〇〇〇〇 印 医療機器プログラムの製造販売承認申請書の記載事例

(注意)

・ 当該記載事例は、あくまでも例示であり、申請する医療機器の特性に応じて 必要な事項を記載すること。

厚生労働科学研究費補助金「医療機器に関する単体プログラムの薬事規制のあり方に関する研究」

様式第六十三の八(一)(第百十四条の十七関係)

収入 印紙

医療機器製造販売承認申請書

類				別	プログラム 2 疾病治療用プログラム		
名	一般	的	名	称			
名称	販	売		名	放射線治療計画ソフトウェア RTPWG-2015		
使	用目的	又	は効	果	別紙1のとおり		
形岩	犬 、 構 造	量 及	び原	理	別紙2のとおり		
原	杉	ţ		料			
性能	及び安全性	上に関	目する お	見格	別紙3のとおり		
使	用	力	j	法	別紙4のとおり		
保管	管方法及	び 有	可効 期	間			
製	造	力	j	法			
制、生	転売する		の制料	느	名 称 登録番号		
表 坦			グ表し	ュル	別紙5のとおり		
					当該医療機器の概要:別紙6 申請区分:改良医療機器(承認基準無し臨床無し)		
					中間区分:以及医療機器(単認基準無し臨床無し) 添付文書(案):別紙 7		
烘	備考			医療機器製造販売業許可番号:○○○			
1/用			与	許可の区分:第一種医療機器製造販売業許可			
				主たる事業所の所在地: 東京都〇〇〇〇			
				QMS 適合性調査:有り			
					QMS 適合性調査申請書提出予定先:医薬品医療機器総合機構		

上記により、医療機器の製造販売の承認を申請します。

平成 年 月 日

住 所 東京都〇〇〇〇

氏 名 医用画像システム株式会社

代表取締役社長〇〇〇〇 ⑩

厚生労働大臣 殿

住 所 東京都○○○所 属 薬事品質管理部

担当者名 〇〇〇〇

電話 0 3 - ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ e-Mail ×××× @×××.co.jp

業者コード 〇〇〇〇

使用目的又は効果

本ソフトウェア(プログラム)は医用画像を利用し、医師が指定した放射線治療領域等の設定情報 及び使用する放射線治療装置の照射情報を用いて、その体内の線量分布を計算及び表示し放射線治療計画の決定を支援する。

【考え方】

装置としては、線量計算機能は含まないものもあり、この場合は次のように記載する。

本ソフトウェア(プログラム)は医用画像上に使用者が腫瘍部位等の領域を作成し、放射線治療装置の幾何学的パラメータを作成することにより、放射線治療を支援する。なお、線量計算機能は含まない。

形状、構造及び原理

1. 概要


本プログラムは、汎用ワークステーションにインストールして使用するプログラムである。

治療部位輪郭や臓器輪郭の作成には主にX-CT画像が用いられるが、MR画像やPET画像を併用することも可能である。

作成した治療部位輪郭や臓器輪郭を基に治療領域を作成し、特定の放射線治療装置の幾何学的パラメータ(照射角度、治療台角度、コリメータ角度、アイソセンタ、マルチリーフコリメータ等)を設定して、体内の線量分布を計算し、その計算結果を表示する。

治療に必要な幾何学的パラメータ等を出力することができる。

下図は構成である。

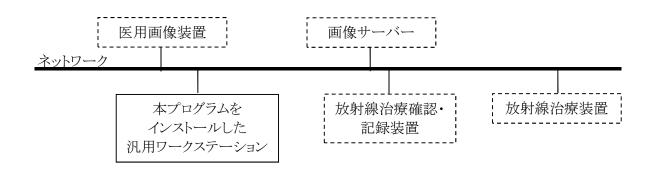

2. 主たる機能

本品目には以下の主たる機能がある。

	項目	機能説明	標準/ オプション の別
1	輪郭作成機能	X-CT 画像等の画像上に臓器や照射領域等の輪郭を設なお、以下の機能は組み合わせて使用可能。	定する。
		1) 閾値処理による輪郭作成 CT 値等の画像データ値の閾値を手動又はあらかじめ 登録しておき、これらを用いて画像上に輪郭を作成す ることを支援する。	標準
		2)X-CT 画像用臓器輪郭作成機能 一般的な臓器の形状をあらかじめ登録しておき、この 情報を基に、X-CT 画像上で対応臓器の輪郭を作成す ることを支援する。	標準
		3)MR 画像用臓器輪郭作成機能 一般的な臓器の形状をあらかじめ登録しておき、この 情報を基に、MR 画像上で対応臓器の輪郭を作成する ことを支援する。	標準
2	放射線治療装置の 幾何学的パラメータ 設定機能	照射角度や照射門数、治療寝台角度、コリメータ角度、アイソセンタ位置、マルチリーフコリメータのような放射線治療をシミュレーションする各パラメータを設定する。	標準
3	放射線治療装置の	放射線治療をシミュレーションする各パラメータを表示す	る機能。
	幾何学的パラメータ 表示機能	1)パラメータの画像上への表示 放射線の照射角度や範囲を示す実線や破線等を X-CT 画像や MRI 画像等へ重ね合わせ表示する。	標準
		2) Beam's Eye View 表示 放射線の線源と照射中心を結ぶ線を法線とする平面の 画像を X-CT 画像等から再構成し、この再構成画像上 に照射範囲を実線や破線等で表示する。	標準
		3) DRR 表示 放射線の線源から照射部位を透視した画像を X-CT 画像等から再構成し、この再構成画像上に照射範囲を実 線や破線等で表示する。	標準
4	線量分布計算機能	放射線治療装置の照射に関する幾何学的パラメータを見布を計算する。	
		1) X 線の線量分布計算	標準
		2)電子線の線量分布計算	標準
		3)陽子線の線量分布計算	オプション
		4) 重粒子線の線量分布計算	オプション
		5)Brachytherapy の線量分布計算	オプション

			I=# 2/#4 /
	項目	機能説明	標準/ 標準/ オプション
			の別
5	線量分布表示機能	線量分布を計算した結果を表示する。	
		なお、以下の機能は組み合わせて使用可能。	
		1)線量分布の重ね合わせ表示	標準
		計算した線量分布を X-CT 画像や MRI 画像等へ重ね	
		合わせ表示する。	
		2)線量分布の3次元表示	標準
		計算した線量分布を3次元再構成して、X-CT 画像や	
		MRI 画像等から再構成した3次元画像と合成して表示	
		する。	
6	線量分布解析機能	線量分布計算結果を解析する処理を行う。	
		なお、以下の機能は組み合わせて使用可能。	
		1)線量統計処理	標準
		最大値や平均値や偏差値等の一般的な統計処理をす	
		る。	
		2)DVH(Dose Volume Histogram)	標準
		線量と体積との関係をグラフ表示する。	
7	照射線量パラメータ	処方した線量を与えるための MU 値あるいは停留時間	標準
	計算/設定機能	等を計算もしくは設定する。	
8	放射線治療パラメー	操作者が IMRT 照射や VMAT 照射の線量の分布の形	オプション
	タ最適化機能	状を指定し、この指定された線量分布になるよう幾何学	
		的パラメータを調整し、指定の分布になるような幾何学	
		的パラメータの組み合わせを求める。	
		小線源治療の場合、カテーテルの位置、本数、停留時	
		間等のパラメータを調整し、指定の分布になるような組	
		み合わせを求める。	
9	再計画機能	すでに作成済みの放射線治療計画の輪郭やパラメー	オプション
		タを、別の医用画像上に呼び出すことにより、新たな放	
		射線治療計画の作成を補助する。	

【考え方】

・本記載事例において、線量分布計算機能を含まない場合は、4項、5項、6項、7項、8項を除く。

3. 付帯する機能

本品目には以下の付帯する機能がある。

	項目	機能説明	標準/ オプション の別
1	外部インタフェース 機能	ネットワークを利用して本プログラムの処理を制御するたースを提供する。	めのインタフェ
		1)プログラム操作 ネットワーク上の他のシステムから本プログラムの操作 を可能にする。	標準
		2) データ通信 ネットワークを利用して他システムとのデータの送受信 を可能とする。	標準
2	画像処理機能	画像処理を行う。 1)WL/WW 変更処理 画像のウィンドウレベル/幅を変更する。	標準
		2)Zoom 処理 画像を拡大又は縮小する。	標準
		3) Pan 処理 画像の位置を移動する。	標準
3	画像計測機能	画像データが有するデータ値や位置情報を用いて各種行う。 なお、以下の機能は組み合わせて使用可能。	の計測処理を
		1)距離計測 画像上の任意の2点間の距離を計測する。	標準
		2) 面積計測 画像上の任意の領域の面積を計測する。	標準
		3)角度計測 画像上の任意の2直線間の角度を計測する。	標準
		4)データ値計測 画像データの値(CT 値等)を計測する。	標準
		5) 画素値計測 画素値を計測する。	標準
		6)統計処理 平均値や偏差値等の一般的な統計処理をする。	標準
		7)ROI 計測 ROI を設定して計測する。	標準
4	データ管理機能	データの追加、変更、削除、保護、保存、タグ設定の管理をする。	標準

【考え方】

・留意通知(薬食機発第 0216001 号 平成 17 年 2 月 16 日)にて、「付帯する機能を有する場合は、 その内容を説明すること」と要求があり、付帯的な機能がある場合には、これに従い記載する。

4. 提供形態

記録媒体等

【考え方】

- ・提供形態について記載が必要であり、記録媒体のみではなく、ダウンロード販売が有る場合は、その旨を記載すること。
- ・また、製造販売業からは記録媒体で販売業に出荷し、販売業からはダウンロード販売の場合は、その旨を記載する。

5. 動作原理

放射線治療計画プログラムの動作原理は以下の通りであり、プログラムの処理のフローも示す。

線量分布計算のアルゴリズムには下記を用いている。

X 線: コンボリューション・スーパーポジション法


○○法

電子線:ペンシルビーム法

(1)フォワードプランニング


- ① 操作者が DICOM 規格の X-CT、MRI、PET などの医用画像を入力する。
- ② 医用画像に操作者が輪郭作成機能を用いて放射線治療領域等の輪郭を入力する。
- ③ 操作者が、放射線治療装置の幾何学的パラメータ設定機能を用いてアイソセンタ位置、照射門数、 照射角度、治療寝台角度、コリメータ角度、マルチリーフコリメータ開度等のパラメータを入力する。
- ④ プログラムの線量分布計算機能および表示機能によって線量分布を計算及び表示する。
- ⑤ プログラムの照射線量パラメータ計算機能が MU 値を算出する。
- ⑥ プログラムの線量分布解析機能が線量統計処理の結果や DVH を表示する。
- ⑦ 操作者が、線量分布と線量分布解析結果を観察して妥当性を判断し、妥当でない場合は③へ戻り、 妥当であったら次の操作に進む。
- ⑧ プログラムがプランニングの結果を記憶装置へ記録する。

フォワードプランニングの処理フロー

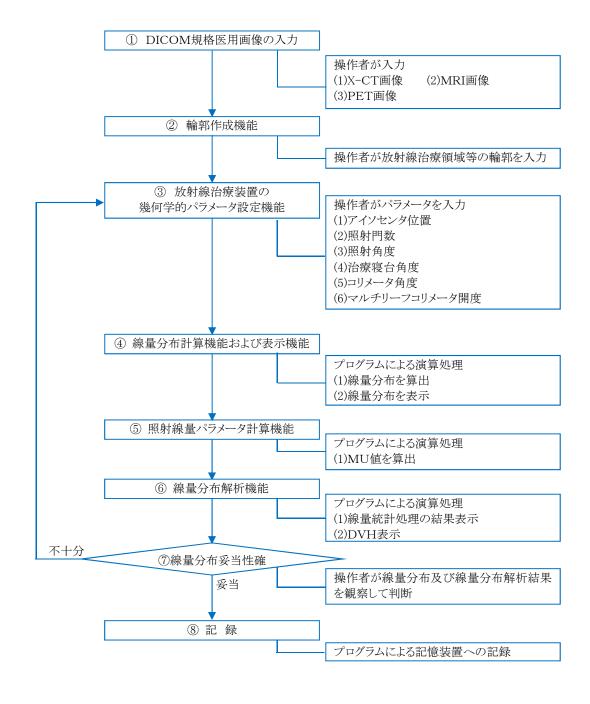

(2)インバースプランニング

- ① 操作者が DICOM 規格の X-CT、MRI、PET などの医用画像を入力する。
- ② 医用画像に操作者が輪郭作成機能を用いて放射線治療領域等の輪郭を入力する。
- ③ 操作者が、放射線治療装置の幾何学的パラメータ設定機能を用いてアイソセンタ位置、照射門数、照射角度、治療寝台角度、コリメータ角度、マルチリーフコリメータ開度等のパラメータの初期値を入力する。
- ④ プログラムの放射線治療パラメータ最適化機能に対して、操作者が線量分布の形状、これは、ター ゲットの目標線量及びリスク臓器の拘束線量を入力指定する。
- (5) プログラムの線量分布計算機能および表示機能によって線量分布を計算及び表示する。
- ⑥ プログラムの放射線治療パラメータ最適化機能が、線量分布の形状の妥当性を確認。 ここで、操作者が指定した目標線量と拘束線量を達成しているか否かをプログラムが判断して、未 達成の場合にはパラメータを調整し⑤に戻る。 目標線量と拘束線量を達成した場合は繰り返しを終了して⑦へ進む。 所定回数繰り返しても目標線量と拘束線量を未達成の場合には終了して⑦へ進む。
- ⑦ プログラムの照射線量パラメータ計算機能がMU値を算出する。
- ⑧ プログラムの線量分布解析機能が線量統計処理の結果や DVH を表示する。
- ⑨ 操作者が、線量分布と線量分布解析結果を観察して妥当性を判断し、妥当でない場合は③へ戻り、 妥当であったら次の操作に進む。
- ⑩ プログラムがプランニングの結果を記憶装置へ記録する。

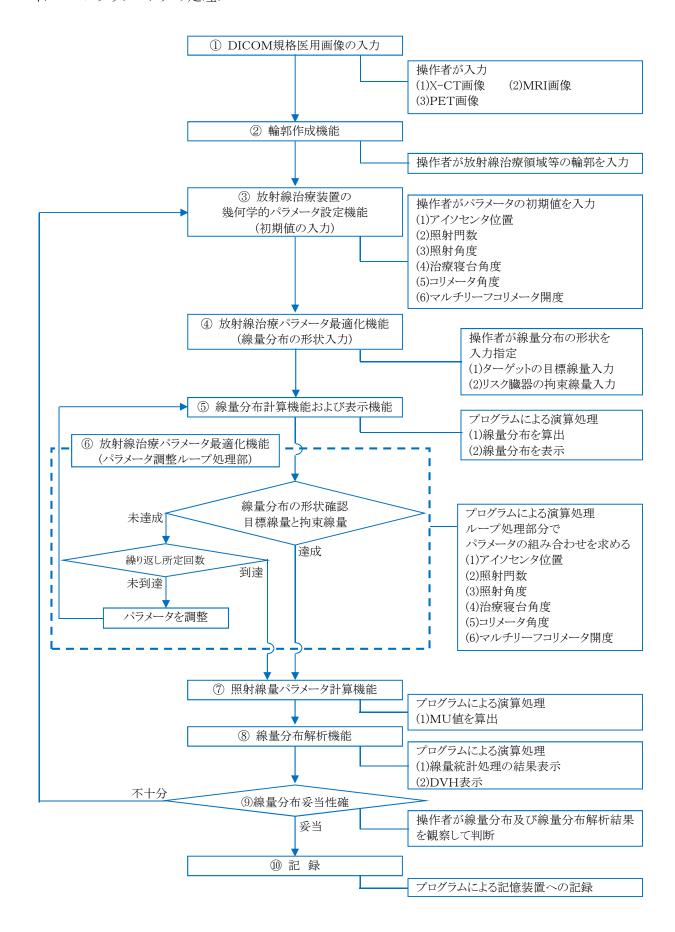

【考え方】

動作原理(インプット情報、処理内容、アウトプット情報)について、どのような品目であるのか、具体的、かつ、詳細に記載する。

(線量計算機能を含まない場合)

放射線治療計画プログラムの動作原理は以下の通り。

- ① 操作者が DICOM 規格の X-CT、MRI、PET などの医用画像を入力する。
- ② 医用画像に操作者が輪郭作成機能を用いて放射線治療領域等の輪郭を入力する。
- ③ 操作者が、放射線治療装置の幾何学的パラメータ設定機能を用いてアイソセンタ位置、照射門数、照射角度、治療寝台角度、コリメータ角度、マルチリーフコリメータ開度等のパラメータを入力する。
- ④ プログラムがプランニングの結果を記憶装置へ記録する。

性能及び安全性に関する規格

1. 性能に関する項目

1. 13	能に関する項目		
	項目	仕様	試験方法
1	輪郭作成機能	1) 閾値処理による輪郭作成を行うことができる。	X-CT 値等の画像データ値の閾値が登録でき、これらを用いて画像上に輪郭を作成できることを確認する。
		2) X-CT 画像用臓器輪郭作成機能 一般的な臓器の形状をあらかじめ登録しておき、この情報を基に、X-CT 画像上で対応臓器の輪郭を作成できる。	あらかじめ登録した臓器の形状を基に、X-CT 画像上で対応臓器の輪郭を作成できることを確認する。
		3) MR 画像用臓器輪郭作成機能 一般的な臓器の形状をあらかじめ登録しておき、この情報を基に、MR 画像上で対応臓器の輪郭を作成できる。	あらかじめ登録した臓器の形状を基に、MR 画像上で対応臓器の輪郭を作成できることを確認する。
2	幾何学的パラメ ータ表示機能	1)パラメータの画像上への表示 放射線の照射角度や範囲を示す実 線や破線等を X-CT 画像や MRI 画 像等へ重ね合わせ表示する。	各々のパラメータを設定する。放射線の照射角度や範囲を示す実線や破線等が X-CT 画像や MRI 画像等へ重ね合わせ表示されることを確認する。
		2) Beam's Eye View 表示 放射線の線源と照射中心を結ぶ線を 法線とする平面の画像を X-CT 画像 等から再構成し、この再構成画像上 に照射範囲を実線や破線等で表示 する。	Beam's Eye View が表示されることを確認する。
		3) DRR 表示 放射線の線源から照射部位を透視し た画像を X-CT 画像等から再構成 し、この再構成画像上に照射範囲を 実線や破線等で表示する。	DRR が表示されることを確認する。
3	線量分布計算機能/線量分布表示機能	放射線治療装置の照射に関する幾何学的パラメータを用いて、線量分布を計算する。 1) X 線の線量分布計算 2) 電子線の線量分布計算 3) 陽子線の線量分布計算 4) 重粒子線の線量分布計算 5) Brachytherapy の線量分布計算	サンプルの幾何学的パラメータを用い、線量計算を実施する。線量が計算され、線量分布が表示されることを確認する。

	項目	仕様	試験方法
4	線量計算アル	開発時に製造元で規定した試験方	製造元で規定した試験方法により確
	ゴリズムの評価	法に基づいて試験した際に設計規	認する。
		格値の範囲内であること。	水中 10cm の正方形 10cm×10cm の
			実測値と計算値を比較した結果、誤
			差は○%/○mm である。
5	線量分布解析	1)線量統計処理	サンプルデータを用いて、計算を実
	機能	最大値や平均値や偏差値等の一般	施する。
		的な統計処理をする。	
		2) DVH (Dose Volume Histogram)	表示されることを確認する。
		線量と体積との関係をグラフ表示す	
	177 6 1 46 E 0 C X	3.	19 1 3 2 Mg B 1 30 2 mg - Feb 2 mg 2 2 1 Fe
6	照射線量パラメ	処方した線量を与えるための MU 値	処方した線量より MU 値あるいは停
	一夕	あるいは停留時間等を計算もしくは	留時間等が計算されることを確認す
	計算/設定機能	設定する。	వ <u>ి</u> .
7	_{- 能} 放射線治療パ	操作者が IMRT 照射や VMAT 照射	 IMRT 照射やVMAT 照射の線量の分
'	ラメータ最適化	の線量の分布の形状を指定し、この	布の形状を指定し、この指定された
	機能	指定された線量分布になるよう幾何	線量分布になるよう幾何学的パラメ
	120 III	学的パラメータを調整し、指定の分	ータが調整され、指定の分布になる
		布になるような幾何学的パラメータの	ような幾何学的パラメータの組み合わ
		組み合わせを求める。	せが求められること。
		小線源治療の場合、カテーテルの位	小線源治療の場合、カテーテルの位
		置、本数、停留時間等のパラメータを	置、本数、停留時間等のパラメータ
		調整し、指定の分布になるような組み	が調整され、指定の分布になるような
		合わせを求める。	組み合わせが求められること。
8	再計画機能	すでに作成済みの放射線治療計画	すでに作成済みの放射線治療計画
		の輪郭やパラメータを、別の医用画	の輪郭やパラメータを、別の医用画
		像上に呼び出すことにより、あらたな	像上に呼び出すことにより、あらたな
		放射線治療計画の作成を補助する。	放射線治療計画の作成を補助できる
			こと。

【考え方】

(線量計算機能を含まない場合)

線量分布計算機能に関連する機能は除くこと。

2. 安全に関する項目

安全に関する項目として以下の規格を参照する。

JIS Z 4715:2011 7 安全に取り扱うための一般要求事項 (または IEC 62083:2000 の該当する項)

	項 目	参照規格
1	距離及び長さ寸法	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.1 項
2	放射線量	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.2 項
3	日付及び時刻の書式	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.3 項
4	許可されていない者の使用防止	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.4 項
5	データの制限値	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.5 項
6	不正な変更からの保護	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.6 項
7	データ転送の正確さ	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.7 項
8	座標系及び目盛	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.8 項
9	データの一時保存及びアーカイブ	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.9 項

使用方法

1. 汎用ワークステーションの要件

本品目は、下記の仕様を満たす汎用 IT 機器に製造販売業者が指定した方法(添付文書又はプログラムに含めた電磁的記録に記載された手順)でインストールして使用する。

汎用 IT 機器は、患者環境外に設置する。

汎用 IT 機器の仕様

汎用 PC:

OS: Windows 7 Professional 以降

HDD(空き容量): 1TB 以上

メモリ: 64GB 以上

表示モニタ:

解像度: 〇〇〇〇×〇〇〇〇ピクセル以上

カラー表示

2. 使用開始準備

- (1) 使用する放射線治療装置の特性情報(線量・幾何学的データ)を登録する。
- (2) ファントムを用いて線量測定を行い、線量計算結果と比較する。

3. 使用前の準備

(1) 汎用ワークステーションの電源を入れる。

4. 操作

- (1) 医用画像装置や画像サーバーから画像データを取得する。
- (2) 放射線治療領域等の輪郭の作成及び放射線治療装置の幾何学的パラメータを設定する。
- (3) 線量計算を行い、表示された結果を見てパラメータ等を調整する。
- (4) 作成した治療計画のパラメータを必要に応じて外部の機器へ送信する。

5. 使用終了後の処理

- (1) 画面上の終了アイコンをクリックするかあるいはメニュー項目から終了機能を選択し、本プログラムを終了させる。
- (2) 必要に応じて汎用ワークステーションの電源を切る。
- 6. 組み合わせて使用する医療機器

本プログラムは、以下の装置と組み合わせて使用可能である。

【考え方】

- ・このプログラムと組み合わせて同時に使用する医療機器が有る場合は、一般的名称、販売名、承認等番号を記載する。
- ・既存の医療機器と医療機器プログラムを組みあわて使用できる場合は、その組み合せ機器について、 一般的名称、販売名、承認等番号を記載し明確化すること。

製造販売する品目の製造所

番号	名 称	登録番号	製造工程
製造所 1	000000	XXXXXXXXX	設計
製造所 2	$\triangle\triangle\triangle\triangle\triangle$	XXXXXXXXX	最終製品の保管

【考え方】

- ・医療機器プログラムの製造所としては、設計を行う製造所と記録媒体が製造販売業から出荷される場合には、最終製品の保管する製造所が登録対象となる。
- ・本事例では記録媒体の販売も含むため、「最終製品の保管」の製造所を記載。
- ・なお、設計が製造販売業の主たる事業所と同一の場所である場合には、製造所の登録を要しないが、この場合、製造所の登録番号の代わりに製造販売業であることを示す「88AAA88888」を記載する。

申請品目	販売名:放射線治療計画ソフトウェア RTPWG-2015		
申請者名	医用画像システム株式会社		
承認申請年月日	平成 年 月 日		
システム受付番号			
一般的名称通知に 示されている一般 的名称のいずれに も該当しないと考 える理由	放射線治療装置の照射情報を用いて、体内の線量分布を計算及び表示することにより、放射線治療計画の決定を支援するプログラムであり、現在定めら		
新設を希望する一 般的名称について	一般的名称(案)	放射線治療計画プログラム	
MX PY A MN(C) JV · C	一般的名称の定義(案)	本プログラムは、医用画像 (X線、X-CT、MRI などの2次元又は3次元画像等)を利用し、医用画像から医師が指定した放射線治療領域等の設定情報及び使用する放射線治療装置の照射情報を用いて、体内の線量分布を計算及び表示することにより、治療計画の決定を支援するプログラムである。放射線治療領域等の設定情報及び/又は使用する放射線治療装置の照射方法の設定のみを支援し、線量分布計算を行わないものもある。	
	クラス分類(案)	クラス分類: III GHTF ルール: 9-② 判断理由:本プログラムはクラスIIIの線形加速器システム等の放射線治療装置のパラメータを計算する機能をもつことから、クラス分類ルール 9-② に該当すると考える。	
	医療機器又は体外診断用 医薬品の分類等(案)	特定保守管理医療機器:非該当 設置管理医療機器:非該当 特定医療機器:非該当 製品群:プログラム 修理区分:非該当 生物由来製品:非該当 特定生物由来製品:非該当 理由:プログラム医療機器である	
担当者連絡先	担当者住所・所属・氏名	東京都〇〇〇	
	電話番号・FAX番号・ E-mail	電話: ○○-○○○-○○○ FAX: ○○-○○○-○○○ E-mail: ○○○○@○○○. ○○○	
備考	本プログラムは、GMDN の system application soft)40887:Radiation therapy treatment planning ware に該当。	

2015 年 XX 月 (第 1 版)

〈医療機器承認番号〉 XXXXXXXXXXXXXXXXX

プログラム 2 疾病治療用プログラム

放射線治療計画ソフトウェア RTPWG-2015

【警告】	【使用上の注意】
	<警告>
【禁忌・禁止】	<禁忌・禁止>
•••••	
•••••	•••••
	<使用注意>
【形状・構造及び原理等】	
•••••	•••••
•••••	
	<重要な基本的注意>
•••••	•••••
•••••	•••••
	•••••
【使用目的又は効果】	
	<相互作用>
	•••••
	•••••
With the Lands to the W	······································
【使用方法等】	<不具合・有害事象>
•••••	•••••
•••••	•••••
•••••	•••••
	•••••

本事例では記載を省略しているが、適切に記載して添付すること。

厚生労働省医薬食品局長通知『医療機器の添付文書の記載要領の改正について』(薬食発 1002 第8号 平成 26 年 10 月2日)に従い記載すること。

記載項目及び記載順序

- (1) 作成又は改訂年月
- (2) 承認番号等
- (3)類別及び一般的名称等
- (4) 販売名
- (5) 警告
- (6) 禁忌・禁止
- (7) 形状・構造及び原理等
- (8) 使用目的又は効果
- (9) 使用方法等
- (10) 使用上の注意

- (11) 臨床成績
- (12) 保管方法及び有効期間等
- (13) 取扱い上の注意
- (14) 保守・点検に係る事項
- (15) 承認条件
- (16) 主要文献及び文献請求先
- (17) 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

医療機器プログラムの製造販売承認申請書添付資料の記載事例

(注意)

- ・ 当該記載事例は、あくまでも例示であり、申請する医療機器の特性に応じて 必要な事項を記載すること。
- ・ 平成27年3月31日までに受け付けられる製造販売承認申請について、当該記載事例を参考として差し支えないこと。

類 別:プログラム 2 疾病治療用プログラム

一般的名称:

販売名 「放射線治療計画ソフトウェア RTPWG-2015」

医療機器製造販売承認申請書 添付資料

略語一覧表

本添付資料中に用いた略号及び略称は次のとおりである。

略号又は略称	意味	
СТ	X-ray Computed Tomography (X 線コンピュータ断層撮影)	
MRI	Magnetic Resonance Imaging (核磁気共鳴画像法)	
PET	Positron Emission Tomography (ポジトロン断層法)	
RTPS	Radiotherapy Treatment Planning System (放射線治療計画システム) 放射線治療のために患者への放射線の照射をシミュレーションするために使用する装置。一般にはコンピュータシステム(プログラマブルな電子システム) である。	
DRR	Digitally Reconstructed Radiography(再構成シミュレーション画像)	
IMRT Intensity-Modulated Radiation Therapy(強度変調放射線治療)		
VMAT	Volumetric-Modulated Arc Therapy(強度変調回転放射線治療)	

目 次

1.	品目の総括	1
	1.1 品目の概要	1
	1.2 設計開発の経緯	2
	1.3 外国における使用状況	6
	(1) 外国における認可(承認)・販売状況	6
	(2) 外国における不具合の発生状況	6
2.	基本要件と基本要件への適合性	7
	2. 1 参照規格一覧	7
	2. 2 基本要件及び適合性証拠	7
	2.3 基本要件への適合性を説明するために用いた規格及び基準の妥当性説明	19
3.	機器に関する情報	20
	3. 1 原材料	20
	3.2 性能及び安全性に関する規格	20
	(1). 性能に関する項目	
	(2). 安全に関する項目	
	3.3 貯蔵方法及び有効期間	
	3.4 その他の機器の仕様に関する情報	
4.	設計検証及び妥当性確認文書の概要	23
	4.1 規格への適合宣言	23
	4.2 機器の設計検証及び妥当性確認の概要	23
	4.3 臨床試験の試験成績	25
5.	ラベリング	26
	5. 1 添付文書(案)	26
6.	リスクマネジメント	27
	6. 1 リスクマネジメントの実施状況	
	(1) リスクマネジメントの社内体制	
	(2) リスク分析の実施状況	
	6.2 安全上の措置を講じたハザード	
7.	製造に関する情報	
7.	1 滅菌方法に関する情報	28
7.	2 品質管理に関する情報	28

1. 品目の総括

1.1 品目の概要

1		類	別	プログラム 2 疾病治療用プログラム	
9	名	一般的名称			
2	名称	販	売 名	放射線治療計画ソフトウェア RTPWG-2015	
3		クラン	7分類		
4		申請	者名	医用画像システム株式会社	
5	使	用目的	り又は効果	承認申請書の「使用目的又は効果」欄に記載のとおり。	
6		構造	•原理	承認申請書の「形状、構造及び原理」欄に記載のとおり。	
7		使用	方法	承認申請書の「使用方法」欄に記載のとおり。	
				申請年月日: 平成 2X 年 X 月 XX 日	
				申請区分: 改良医療機器(承認基準なし臨床なし)	
8		備	考		
				一般的名称 該当する一般的名称なし の該当性:	

外観写真:非該当

1.2 設計開発の経緯

(1) 申請品目を開発するに至った背景から申請までの経緯

(適切に記載すること)

放射線治療の目的および開発の経緯から、放射線治療計画作成を支援するため、本申請品目の設計開発コンセプトは以下の通りである。

- 1) 線量分布作成の手順のコンピュータ化により、医師が指定した照射方法による線量分布を容易に求めることができるようにすることで、照射方法の計画作成の支援を行う。
- 2) 線量分布作成の手順のコンピュータ化により、照射方法の計画作成手順を操作者間で共通化でき、計画作成の効率向上を可能にする。
- 3) CT の連続した断層画像を用いて治療部位およびその周辺臓器の三次元像を作成し、医師が治療部位 と周辺臓器との位置関係を立体的に観察できるようにすることで、治療部位に限局した照射方法の計画 作成を支援する。
- 4) MRI 画像や PET 画像を、CT 画像と重ね合わせて、重ね合わせた双方の三次元画像を表示して治療部位と周辺臓器との位置関係を立体的に観察できるようにすることで、治療部位に限局した照射方法の計画作成を支援する。
- 5) 臓器等の輪郭の自動抽出により、輪郭作成に要する時間を短縮する。

- (2) その他設計開発の経緯
- ① 申請品目の設計開発に着手した経緯

(適切に記載すること)

- ② 申請品目の設計仕様の概要及び設計仕様を定めるに当たって考慮した事項
- 1)申請品目の設計仕様の概要及び設計仕様を定めるに当たって考慮した事項

表 1.2.(2)-1 に、1.2.1 項に示した設計開発のコンセプトに基づいて設定した、申請品目の設計仕様を定める に当たって考慮した事項を示す。

表 1.2.(2)-1 設計コンセプト

設計コンセプト	申請品目の設計仕様	設計仕様を定めるに当たって 考慮した事項	
1) 線量分布作成の手順のコンピュータ 化により、医師が指定した照射方法に よる線量分布を容易に求めることがで きるようにすることで、照射方法の計 画作成の支援を行う。 2) 線量分布作成の手順のコンピュータ 化により、照射方法の計画作成手順 を操作者間で共通化でき、計画作成 の効率向上を可能にする。 3) CT の連続した断層画像を用いて治療部位およびその周辺臓器の三次元 像を作成し、医師が治療部位と周辺臓器との位置関係を立体的に観察で きるようにすることで、治療部位に限 局した照射方法の計画作成を支援す る。 4) MRI 画像や PET 画像を、CT 画像と 重ね合わせて、重ね合わせた双方の 三次元画像を表示して治療部位と周 辺臓器との位置関係を立体的に観察 できるようにすることで、治療部位に限 局した照射方法の計画作成を支援す る。	 幾何学的パラメータ設定 /表示機能 線量分布表示機能 線量分布解析機能 照射線量パラメータ計算 /設定機能 放射線能 両化機能 再計画人と 一タ人の理機能 画像計測機能 画像計測機能 	設計コンセプトを達成できる機能について設定し、その機能の意図が達成できることを、試験実施を以て確認した。また、リスク分析を実施した。	
5) 臓器等の輪郭の自動抽出により、輪郭作成に要する時間を短縮する。	• 輪郭作成機能	設計コンセプトを達成できる機能について設定し、その機能の意図が達成できることを、試験実施を以て確認した。また、リスク分析を実施した。	
安全性 〇〇を参照した。	・ 距離及び長さ寸法・ 放射線量・ 日付及び時刻の書式・ データ転送の正確さ・ データの一時保存及びアーカイブ	IEC62083 (または JIS Z 4715) に規定のある「安全に取り扱うための一般要求事項」を参照して設定した。また、リスク分析を実施した。	

2)類似する医療機器との差分に関する情報

表 1.2.(2)-2 に、「〇〇〇〇」(承認番号:XXXXXXXXXX)を類似する医療機器として、申請品目と比較し、 差分に関する情報を示す。

申請品目と類似医療機器とを比較した結果、類似医療機器は、使用するプラットフォームをその構造に含んでいることにおいて差分はあるが、両者において、使用目的、原理、機能は実質的に同等であると考える。

表 1.2.(2)-2 類似する医療機器との差分に関する情報

, , , , ,	申請品目	類似する医療機器	差分に関する情報
類別	プログラム 二 疾病治療用プログ	器具器械 9 医療用エックス線装	2007 0 114 17
,,,,,,	ラム	置及び医療用エックス線装置用	
		エックス線管	
一般的名称	該当する一般的名称なし	その他の放射線治療用関連装	
7505	21.3 / 3 / 20.3	置(放射線治療計画装置)	
販売名	放射線治療計画ソフトウェア	00000	
	RTPWG-2015		
製造販売業		○○○○○株式会社	
者等	医用画像システム株式会社		
承認番号	_	XXXXXXXX	
承認年月日	_	平成 XX 年 XX 月 XX 日	
使用目的又	本ソフトウェア(プログラム)は、医	2. 使用目的	同等である。
は効果	用画像を利用し、医師が指定した	••••	-
(類似機器:	放射線治療領域等の設定情報及		
性能、使用	び使用する放射線治療装置の照		
目的、効能	射情報を用いて 、体内の線量分		
又は効果欄	布を計算及び表示する。		
より該当部			
分の転記)			
形状、構造	1 概要	1. 概要	同等である。
及び原理	本プログラムは、汎用ワークステ	••••	
	ーションにインストールして使用す		
	るプログラムである・・・。(構成図省		
	略)		
		2. 構成	申請品目において
		単体名	は、ハードウェア(汎
		(1)コンピュータ	用 IT 機器)を含めて
		(2) キーボード	いない。
		(3) マウス	
		(4) モニタ	
	2 主たる機能	6. 各部の機能及び動作	類似する医療機器に
	輪郭作成機能	•••••	おいては、ハードウェ
	幾何学的パラメータ設定機能		アの機能について規
	幾何学的パラメータ表示機能		定している。
	線量分布計算機能		申請品目において
	線量分布表示機能		は、ハードウェアを含
	線量分布解析機能		めていないが、プログ
	照射線量パラメータ計算/設定機 能		ラムの機能について、
	EE 放射線治療パラメータ最適化機能		類似する医療機器と同等である。
	放射線信様パクメータ最適化機能 再計画機能		円守てめる。
	〒1 四次形		
	 3 付帯する機能		
	5 円 年 9 名機能 データ入出力機能		

	中計口口	海川 よる 原体 機関	光八ヶ胆-ナッ 桂-却
	申請品目	類似する医療機器	差分に関する情報
	外部インタフェース機能		
	画像処理機能		
	画像計測機能		
	データ管理機能		
	ユーザ管理機能		
	4 提供形態:記録媒体		
	5 動作原理	9. 作動原理	同等である。
	フォワードプランニング	•••••	
	①医用画像の入力:操作者		
	\downarrow		
	②放射線治療領域等の輪郭を設		
	定する:操作者		
	\downarrow		
	• • • •		
性能及び安	1 輪郭作成機能	1. 仕様	申請品目において
全性に関す	1) 手書きによる輪郭作成を行うこと		は、ハードウェアを含
る規格	ができる。		めていないが、プログ
(類似機器:	2) 閾値処理による輪郭作成を行う	6-1. 外観及び表示試験	ラムの実行する機能
性能、使用	ことができる。	6-2. 電気的安全性試験	について、規格を定
目的、効能	••••	••••	めている。
又は効果、			
及び規格及			
び試験方			
法)			
使用方法	1. プラットフォームの要件	1. システムの起動と終了	同等である。
(類似機器:	本品目は、下記の仕様を満たす	••••	申請品目において
操作方法又	汎用 IT 機器に製造販売業者が指		は、汎用 IT 機器の要
は使用方	定した方法でインストールして使用		件について、本欄に
法)	する		規定する。
1	•••••		7,70,70 7 90
	0		
資料の出典	_	医療用具輸入承認申請書	

③ 設計仕様に基づき、申請品目の品質、有効性及び安全性が確保されているとみなせることを検証した結果本装置のリスク分析の結果は 6. リスクマネジメントの項に記載するとおりである。また、上述の設計開発コンセプトに基づき設定した、本装置の性能及び安全性に関する規格についての適合を検証し、期待した結果が得られたことを確認した。当該検証の結果は 4.2 項に示すとおりである。

なお、申請品目は、海外において既に一般的に広く使用されている放射線治療計画システムと同等のもので あるため、それらの使用成績によって、その安全性は担保されているものと考える。

1. 3 外国における使用状況

(1) 外国における認可(承認)・販売状況

本申請品目は、20XX 年 XX 月 XX 日現在、本邦を除く XX ヵ国において使用されている。外国における認可(承認)の状況及びインストール数を、それぞれ表 1.3.(1)-1 及び表 1.3.(1)-2 に示す。

表 1.3.(1)-1 主要な諸外国における認可(承認)の状況 (20XX 年 XX 月 XX 日現在)

			(00 (2012) 1217) 121 (2012)
	国名•地域名	販売名	許認可年 (認可番号)
	EU	0000000	20XX 年 XX 月 XX 日 CE マーク取得(CE XXXX)
	米国	0000000	20XX 年 XX 月 XX 日 510(k)取得(K XXXX)
	カナダ	0000000	20XX 年 XX 月 XX 日 Health Canada 認証(XXXXX)
	オーストラリア	0000000	20XX 年 XX 月 XX 日 TGA 認証(XXXXX)

表 1.3.(1)-2 外国における使用状況 (20XX 年 XX 月 XX 日現在)

= / II (=40)	
国名	インストール施設数
米国	XXX
カナダ	XXX
オーストラリア	XXX

合計 XXXX 施設

(2) 外国における不具合の発生状況

外国で報告されている本申請品目の不具合報告を表 1.3.(2)-1 に示す。

表 1.3.(2) -1 外国における不具合の発生状況(20XX 年 XX 月 XX 日~201X 年 XX 月 XX 日現在)

不具合・有害事象の種類	件数
(有れば記載する。)	3
(有れば記載する。)	1

(不具合の報告の表を示した場合)

上記の通り不具合の報告は有るが、死亡、重篤な健康被害は発生していない。

(不具合の報告の表が無い場合)

外国における販売実績は有るが、重篤な不具合の発生は報告されていない。

2. 基本要件と基本要件への適合性

2. 1 参照規格一覧

基本要件への適合性を示すために用いた規格を表 2.1 に示す。

表 2.1 参照規格一覧

規格	タイトル
JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000)	医用電気機器-放射線治療計画システムの安全要求事項 (Medical electrical equipment-Requirements for the safety of radiotherapy treatment planning systems)
JIS T 14971:2012 (または IEC14971:2007)	医療機器ーリスクマネジメントの医療機器への適用 (Medical devices Application of risk management to medical devices)
DICOM 規格	医療におけるデジタル画像と通信 (DICOM) Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)

2. 2 基本要件及び適合性証拠

(1) 基本要件への適合性

以下に示すチェックリストを用いて、基本要件の各項目への適合性の確認を行った。

第一章 一般的要求事項

基本要件 改正案	当該 機器へ の 通 不 適 用・ 適	適合の方法	特定文書の確認	該当する社 内文書番号 等
(設計)				
第一条 医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用途に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた意図された使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用	適用	要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。	医療機器及び体外 診断用医薬品の製 造管理及び品質管 理の基準に関する省 令(平成 16 年厚生 労働省令第 169 号)	
者(当該医療機器の使用に関して専門的知識を要する場合にあっては当該専門的知識を有する者に限る。以下同じ。)及び第三者(当該医療機器の使用に当たって安全や健康に影響を受ける者に限る。第四条において同じ。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用の際に発生する危険性の程度が、その使用によって患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていなければならない。		認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器への適用」	6. リスクマネ
(リスクマネジメント)				
第二条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚し				

て医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。						
一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。	適用	ってリスク管理が計	JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器への適用」	6. リスクマネ		
二 前号により評価された危険性を本質的な 安全設計及び製造を通じて、合理的に実 行可能な限り除去すること。	適用	同上	同上	同上		
三 前号に基づく危険性の除去を行った後に 残存する危険性を適切な防護手段(警報 装置を含む。)により、合理的に実行可能な 限り低減すること。	適用	同上	同上	同上		
四 第二号に基づく危険性の除去を行った後 に残存する危険性を示すこと。	適用	同上	同上	同上		
(医療機器の性能及び機能)						
第三条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計及び製造されなければならない。		要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。	医療機器及び体外 診断用医薬品の製 造管理及び品質管 理の基準に関する省 令(平成16年厚生 労働省令第169号)	本添付資料 4.1 規格へ の適合宣言		
(製品の有効期間又は耐用期間)						
第四条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の有効期間又は耐用期間内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従って、通常の使用条件の下で発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従って適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者、使用者及び第三者の健康及び安全を脅かす有害	適用	要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。	医療機器及び体外 診断用医薬品の製 造管理及び品質管 理の基準に関する省 令(平成16年厚生 労働省令第169号)	本添付資料 4.1 規格へ の適合宣言		
な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであってはならない。		認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971:「医療機 器ーリスクマネジメン トの医療機器への適 用」	本添付資料 6. リスクマネ ジメント		
(輸送及び保管等)						
第五条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従った条件の下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならない。	適用	要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。	医療機器及び体外 診断用医薬品の製 造管理及び品質管 理の基準に関する省 令(平成16年厚生 労働省令第169号)	本添付資料 4.1 規格へ の適合宣言		
		認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されているこ	JIS T 14971:「医療機 器ーリスクマネジメン トの医療機器への適	本添付資料 6. リスクマネ ジメント		

		とを示す。	用」	
(医療機器の有効性)				l l
常の使用条件の下で、合理的に実行可能 な限り低減され、当該医療機器の意図さ れた有効性と比較した場合に受容できる	適用	リスク分析を行い、 便益性を検証する。	JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネジ メントの医療機器へ の適用」	6. リスクマ
ものでなければならない。			(1)輪郭作成機能	4.2. 機器の設定 機器 で 及び認の概要
			能 (10)放射線治療パラ メータ最適化機能	

第二章 設計及び製造要求事項

(医療機器の化学的特性等)			
第七条 医療機器は、使用材料の選定について、必要に応じ、次の各号に掲げる事項について注意が払われた上で、設計及び製造されていなければならない。			
一 毒性及び可燃性	不適用	医療機器プログラムであり物質を含まないため。	
二 使用材料と生体組織、細胞及び体液と の間の適合性	不適用	同上	
三 硬度、摩耗及び疲労度等	不適用	同上	
2 分析機器等(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器の うち、人の身体に直接使用されることの	不適用	分析機器関係の要求であり不適用。	

ないものをいう。以下同じ。)は、必要に応じ、当該分析機器等に使用材料と検体及び分析の対象となる物(生体組織、細胞、体液、微生物等を含む。)との間の不適合により生じる性能の低下を考慮し、設計及び製造されていなければならない。				
3 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者に対して汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されていなければならず、また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接触頻度について注意が払われていなければならない。	不適用	汚染物質等を考慮 しなければいけな い医療機器ではな い。		
4 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と同時に使用される物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されていなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その用途に沿って当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されていなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。		
5 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該医療機器(当該物質を含む。)の安全性、品質及び性能は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。	不適用	医薬品を含有する機器ではない。		
6 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていなければならない。特に発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質には特別な注意を払わなければならない。	不適用	溶出又は漏出する 物質を含む機器で はない。		
7 医療機器は、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から浸出することにより発生する危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。		
(微生物汚染等の防止)				
第八条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、患者、使用者及び第三者(当該医療機器の使用に当たって感染の危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減するよう、次の各号を考慮して設計されていな				
			ν	7

ければならない。			/	/
一 取扱いを容易にすること。	不適用	感染及び微生物汚 染の危険性がある 機器ではない。		
二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝(ばく)露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。	不適用	同上		
三 必要に応じ、患者、使用者及び第 三者による医療機器又は検体への微 生物汚染を防止すること。	不適用	同上		
2 医療機器に組み込まれた動物由来組織等の制力では、当該動物由来組織等の使用している。)は、当該動物由を管理を関係を対して、当該動物はに対する。)は、当該の使用のでは、当該の使用がないのでは、当該のでは、動物のでは、対しては、対しては、対しては、があるが、対しては、があるが、対しては、があるが、対しては、があるが、があるが、があるが、があるが、があるが、があるが、があるが、がある	不適用	動物由来組織等の原料又は材料を組み入れた機器ではない。		
3 医療機器に組み込まれたヒトト 無細胞及び物質(以適切ならなりという。 無細胞及び物質は、適切ならなりという。 無細胞及び物質は、適切ならなりという。 を大きないのでなけれてはいのでは、下でないのでははいのでははいのでははないのではないができまれては、ののではないのでは、はないのでは、では、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、というのでは、というのでは、というのでは、というのでは、というのでは、この限りでない。	不適用	ヒト由来組織等の原料又は材料を組み入れた機器ではない。		
4 製造販売業者等は、医療機器に組み込まれた微生物由来組織等(微生物由来の細胞及び物質をいう。)の処理、保存、試験及び取扱いにおいて、患者、使用者及び第三者に対する最適な安全性を確保し、かつ、ウイルス及びその他の感染性病原体対策のため、妥当性が確認されて	不適用	微生物由来組織等 の原料又は材料を 組み入れた機器以 外は不適用		

	1			1
いる方法を用いて、当該医療機器の製造 工程においてそれらの除去又は不活化を 図ることにより安全性を確保しなければ ならない。ただし、分析機器等であっ て、使用に当たりウイルスその他の感染 性病原体が必要なもの又はそれらの除去 若しくは不活化により性能が低下するも				
石しくは小石化により性能が低下するものについては、この限りでない。				
5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されていなければならない。	不適用	特別な微生物学的 状態にある機器で はない。		
6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされるよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従って、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされてなければならない。	不適用	滅菌状態で出荷される機器ではない。		
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にある ことを表示した医療機器は、妥当性が確 認されている適切な方法により滅菌又は 特別な微生物学的状態にするための処理 が行われた上で製造され、必要に応じて 滅菌されていなければならない。	不適用	滅菌又は特別な微生物学的状態にある機器ではない。		
8 滅菌を施さなければならない医療機器 は、適切に管理された状態で製造されな ければならない。	不適用	滅菌を施さなけれ ばならない機器で はない。		
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。	不適用	使用前に滅菌を施 さなければならな い機器ではない。		
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌 の両方の状態で販売される場合、両者 は、包装及びラベルによってそれぞれが 区別できるようにしなければならない。	不適用	滅菌及び非滅菌の 両方の状態で販売 される機器ではな い。		
(使用環境に対する配慮)				
第九条 医療機器が、他の医療機器、体外診断用医薬品その他の装置等と併用される場合は、当該医療機器と当該装置等が安全に接続され、かつ、当該併用により当該医療機器及び当該装置等の性能が損なわれないようにしなければならない。	適用	従ってリスク管理	JIS T 14971:「医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」	6. リスクマ
		認知された規格の 該当する項目に適 合することを示 す。	DICOM 規格 (Digital Imaging and Communication in Medicine)	

				,
2 前項の場合の使用上の制限事項は、医療機器に添付する文書又はその容器若しくは被包(第十七条において「添付文書等」という。) に記載されていなければならない。	適用	基準の該当する項	医療機器の添付文書の記載要領の改正について(薬食発 1002 第 8 号:平成26 年 10 月 2 日)	
3 医療機器は、使用者が操作する液体又はガスの移送のための接続部又は機械的に結合される接続部について、不適切な接続から生じる危険性を最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。	不適用	医療機器プログラムでありハードを含まないため。		
4 医療機器は、その使用に当たって患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって次の各号に掲げる危険性がある者に限る。)に生じる次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない。				
一 物理的及び人間工学的特性に関連 した傷害の危険性	不適用	医療機器プログラムであり物質を含まないため。		
二 医療機器の意図された使用目的に おける人間工学的特性、人的要因及 びその使用環境に起因した誤使用の 危険性	適用	該当する項目に適	JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器への適用」	
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性	不適用	医療機器プログラ ムであり物質を含 まないため。		
四 通常の使用条件の下で、曝(ばく)露 された物質、液体又はガスと接触し て使用することに関連する危険性	不適用	医療機器プログラムであり物質を含まないため。		
五 プログラムと当該プログラムの実 行環境との間で発生しうる干渉に関 連する危険性	適用	該当する項目に適	JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器への適用」	
六 物質が偶然に医療機器に侵入する 危険性	不適用		JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器への適用」	
七 検体を誤認する危険性	不適用	検体を取り扱う機 器ではない。		
八 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性	不適用	医療機器プログラムでありハードを 含まないため。		
九 保守又は較正が不可能な場合、使 用材料が劣化する場合又は測定若し くは制御の機構の精度が低下する場 合などに発生する危険性	不適用	医療機器プログラムでありハードを 含まないため。		

5 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質とともに使用される(これらの物質に曝(ばく)露し、又はこれらの物質と併用される場合を含む。)ことが意図されている医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。		医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。		
6 医療機器は、意図する性能を発揮する ために必要な調整、較正及び保守が安全 に実施できるよう設計及び製造されてい なければならない。		該当する項目に適	JIS T 14971:「医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」	6. リスクマ
7 医療機器は、すべての廃棄物の安全な 処理を容易にできるように設計及び製造 されていなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。		
(測定又は診断機能に対する配慮)				
第十条 測定機能を有する医療機器及び診断用医療機器(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医療機器をいう。)は、当該医療機器の使用目的に照らし、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。	(該当 する場	該当する項目に適	JIS T 14971:「医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」	6. リスクマ
2 分析機器等は、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、その性能が使用目的に合致するように、設計及び製造されていなければならない。設計に当たっては、感度、特異性、正確性に係る真度及び精度(反復性及び再現性を含む。)並びに既知の干渉要因の管理及び検出限界に適切な注意を払わなければならない。また、その性能は、製造販売業者等が設定する当該医療機器の有効期間又は耐用期間内において維持されなければならない。		分析機器関係の要求であり不適用。		
3 分析機器等の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、利用可能な標準的な測定方法又は高次の標準物質を用いて保証されなければならない。	不適用	分析機器関係の要求であり不適用。		
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。	適用	認知された規格に 従ってリスク管理 が計画・実施され ていることを示 す。	JIS T 14971:「医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」	6. リスクマ
5 数値で表現された値については、可能 な限り標準化された一般的な単位を使用	適用	認知された規格の 該当する項目に適 合することを示	JIS T 14971:「医 療	本添付資料 6. リスク

(放射線に対する防御)			
第十一条 医療機器(分析機器等を除く。)は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために、適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって放射線被曝(ばく)の危険性がある者に限る。第六項において同じ。)への放射線被曝(ばく)が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。		放射線を照射する機器ではない。	
2 分析機器等は、その使用目的に沿って、測定等のために、適正な水準の放射線の放射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者(分析機器等の使用に当たって放射線被曝(ばく)の危険性がある者に限る。)への放射線被曝(ばく)が、合理的に実行可能な限り適切に低減するよう、設計、製造及び包装されていなければならない。	不適用	分析機器関係の要求であり不適用。	
3 医療機器の放射線出力について、医療 上その有用性が放射線の照射に伴う危険 性を上回ると判断される特定の医療目的 のために、障害発生の恐れ又は潜在的な 危害が生じる水準の可視又は不可視の放 射線が照射されるよう設計されている場 合においては、線量が使用者によって制 御できるように設計されていなければな らない。当該医療機器は、関連する可変 パラメータの許容される公差内で再現性 が保証されるよう設計及び製造されてい なければならない。	不適用	放射線を照射する機器ではない。	
4 医療機器が、障害発生のおそれがある水準又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線を照射する場合には、照射を確認するための視覚的表示又は聴覚的警報を、合理的に実行可能な限り具備していなければならない。		放射線を照射する機器ではない。	
5 分析機器等は、照射する放射線の特性 及び線量を合理的に実行可能な限り適切 に制御又は調整できるよう、設計及び製 造されていなければならない。	不適用	分析機器関係の要求であり不適用。	
6 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝(ばく)を、合理的に実行可能な限り低減するよう設計及び製造されていなければならない。	不適用	放射線を照射する機器ではない。	
7 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。	不適用	放射線を照射する機器ではない。	
8 電離放射線を照射する医療機器は、合理的に実行可能な限り、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布又は線質を変更及び制御できるよう、設計及び製造され	不適用	電離放射線を照射する機器ではない。	

なければならない。				
9 電離放射線を照射する診断用医療機器	不適田	電離放射線を照射		
は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。	小順用	も離成れ様を思知する機器ではない。		
10 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ、放射線ビ	不適用	電離放射線を照射 する機器ではない。		
ームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されていなければならない。				
(プログラムを用いた医療機器に対する配慮	意)			
第十二条 プログラムを用いた医療機器 (医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器を含む。以下同じ。) は、その使用目的に照らし、システムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、当該故障から生じる可能性	適用	る認知された基準	医療機器及び体外 診断用医薬品の製 造管理及び品質管 理の基準に関する 省令(平成 16 年厚 生労働省令第 169 号)	4.1 規格へ
がある危険性を、合理的に実行可能な限り除去又は低減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。		従ってリスク管理	JIS T 14971:「医療 機器ーリスクマネ ジメントの医療機 器への適用」	6. リスクマ
2 プログラムを用いた医療機器については、最新の技術に基づく開発のライフサイクル、リスクマネジメント並びに当該医療機器を適切に動作させるための確認及び検証の方法を考慮し、その品質及び性能についての検証が実施されていなければならない。	(平成 29年 11月	該当する項目に適 合することを す。 認知された規格に びってリスク管理	JIS T 2304:「医療機器ソフトウェア-ソフトウェアライフサイクルプロセス」 JIS T 14971:「医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」	間につき、
(能動型医療機器及び当該能動型医療機器	景に接続	された医療機器に対す	する配慮)	
第十三条 能動型医療機器は、当該能動型 医療機器に一つでも故障が発生した場 合、当該故障から生じる可能性がある危 険性を、合理的に実行可能な限り適切に 除去又は低減できるよう、適切な手段が 講じられていなければならない。	適用	従ってリスク管理	JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器への適用」	
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、 患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電 力供給状況を判別する手段が講じられて いなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。		
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。		
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡 又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければ	不適用	臨床パラメータをモ ニタする機器ではな い。		

ならない。			
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なうおそれのある電磁的干渉の発生リスクを、合理的に実行可能な限り低減するよう、設計及び製造されていなければならない。		医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。	
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されていなければならない。	不適用	プログラムである ため不適用	
7 医療機器は、製造販売業者等の指示に基づき正常に据付けられ、及び保守され、かつ、通常の使用条件下又は当該医療機器に一つでも故障が発生した状態で使用される場合において、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって偶発的に感電するおそれがある者に限る。)が偶発的に感電するおそれを合理的に実行可能な限り防止できるよう、設計及び製造されていなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。	
(機械的危険性に対する配慮)			
第十四条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者、使用者及び第三者(医療機器の使用に当たって機械的危険性がある者に限る。以下この条において同じ。)を防護するよう設計及び製造されていなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。	
2 分析機器等は、可動部分に起因する危険性又は破壊、分離若しくは物質の漏出に起因する危険性がある場合には、その危険を防止するための、適切な仕組みが組み込まれていなければならない。	不適用	分析機器関係の要求であり不適用。	
3 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう設計及び製造されていなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。	
4 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。	
5 使用者又は第三者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のある全ての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されていなければならない。	不適用	医療機器プログラ ムでありハードを 含まないため。	
6 医療機器は、使用前又は使用中に接続	不適用	医療機器プログラ	

することが意図されている特定部分の誤		ムでありハードを		
接続の危険性について、合理的に実行可能な限り最も低い水準に抑えられるよう		含まないため。		
設計及び製造されていなければならな				
い。	マン本田			
7 医療機器のうち容易に触れることのできる部分(意図的に加熱又は一定温度を	个週用	医療機器プログラムでありハードを		
維持する部分を除く。)及びその周辺部		含まないため。		
は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなけ				
ればならない。				
(エネルギー又は物質を供給する医療機器	器に対す	る配慮)		
第十五条 患者にエネルギー又は物質を供	不適用	エネルギー又は物質な卑者に供給す		
給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維		質を患者に供給する機器ではない。		
持ができるよう設計及び製造されていな		- pytha - 111 - 0		
ければならない。	ナギ田			
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある 不適正なエネルギー又は物質の供給を防	个週用	エネルギー又は物質を患者に供給す		
止又は警告する手段が具備され、エネル		る機器ではない。		
ギー源又は物質の供給源からの危険量の エネルギーや物質の偶発的な放出を可能				
な限り防止する適切な手段が講じられて				
いなければならない。				
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならな	不適用	エネルギー又は物質を患者に供給す		
にかり惟に記されていなりればならない。操作に必要な指示を医療機器に表示		る機器ではない。		
する場合、或いは操作又は調整用のパラ				
メータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたっ				
て患者の安全及び健康等に影響を及ぼす				
場合に限り、患者も含む。)にとって、 容易に理解できるものでなければならな				
い。				
(一般使用者が使用することを意図した図	医療機器	に対する配慮)		
第十六条 一般使用者が使用することを意	不適用	一般使用者が使用	/	
図した医療機器(医療機器のうち、自己 検査医療機器又は自己投薬医療機器その		することを意図し た医療機器ではな		
他のその使用に当たり専門的な知識を必		い。		
ずしも有しない者が使用することを意図				
したものをいう。以下同じ。) は、当該 医療機器の使用者が利用可能な技能及び				
手段並びに通常生じ得る使用者の技術及				
び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿って適正に操作できるように設計及び製				
造されていなければならない。				
2 一般使用者が使用することを意図した	不適用	一般使用者が使用		
医療機器は、当該医療機器の使用、検体 の使用(検体を使用する当該医療機器に		することを意図し た医療機器ではな		
限る。)及び検査結果の解釈に当たっ		い。		
て、使用者が誤使用する危険性を合理的 に実行可能な限り低減するように設計及				
で製造されていなければならない。				
3 一般使用者が使用することを意図した	不適用	一般使用者が使用		
医療機器については、合理的に実行可能 な限り、製造販売業者等が意図したよう		することを意図し た医療機器ではな		
に機能することを使用者が検証できる手		に医療機器ではない。		
-				-

順を定めておかなければならない。				
(添付文書等による使用者への情報提供)	l			
第十七条 製造販売業者等は、医療機器が製造販売される際に、使用者の医療機器に関する訓練及び知識の程度を考慮し、当該医療機器の添付文書等により、製造販売業者名、安全な使用方法及びその性能を確認するために必要な情報を、使用者が容易に理解できるように提供しなければならない。	適用	従ってリスク管理	書の記載要領の改正について(薬食発1002第8号:平成26年10月2日) JIS T 14971:「医療機器ーリスクマネジメントの医療機	6. リスクマ
(性能評価及び臨床試験)	ı			
第十八条 医療機器の性能評価を行うため に収集されるすべてのデータは、医薬 品、医療機器等の品質、有効性及び安全 性の確保等に関する法律(昭和三十五年 法律第百四十五号) その他関係法令の定 めるところに従って収集されなければな らない。	適用		医療機器の製造販売承認申請について第2の1 (薬食発1120第5号 平成26年11月20日)	
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従って実行されなければならない。	不適用	臨床試験を必要と する機器ではな い。		
3 医療機器は、第一項及び第二項に定めるもののほか、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)に基づき、当該医療機器に応じて必要とされる試験成績及びデータその他の記録により継続的に評価されなければならない。	不適用	製造販売後の調査 及び試験を必要と する機器ではない。		

2. 3 基本要件への適合性を説明するために用いた規格及び基準の妥当性説明

以下に、基本要件への適合性を説明するために用いた規格及び基準の妥当性を説明する。

・JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000)

本規格は、「放射線治療計画システム」の安全性について規定する規格であり、申請品目の性能・安全性について評価するために用いることは妥当であると判断した。

•JIS T 14971:2012 (または IEC14971:2007)

本規格は、「医療機器ーリスクマネジメントの医療機器への適用」について規制する規格であり、医療機器のリスクマネジメントについて評価するために用いることは妥当であると判断した。

·DICOM 規格

CT や MRI 等の画像診断装置で撮影した医用画像のフォーマットと、それらの画像を扱う医用画像機器間の通信プロトコルを定義した標準規格であり、申請品目の他の機器との画像の通信に係る互換性を評価するために用いることは妥当であると判断した。

3. 機器に関する情報

3. 1 原材料

申請品目は医療機器プログラムであるため記載を省略する。

3.2 性能及び安全性に関する規格

以下に、本申請品の性能及び安全性に関する規格として設定した項目について、本申請品の性能及び安全性を保証するのに必要かつ十分であることの根拠を説明する。

(1). 性能に関する項目

	項目	仕様	試験方法	設定根拠
1	輪郭作成機能	1) 閾値処理による輪郭作成を行うことができる。	CT 値等の画像データ値の 閾値が登録でき、これらを用 いて画像上に輪郭を作成で きることを確認する。	JIS Z 4715 9.3 a)に基づいた。
		2) CT 画像用臓器輪郭作成機能 一般的な臓器の形状をあらかじめ登録しておき、この情報を基に、CT 画像上で対応臓器の輪郭を作成できる。	あらかじめ登録した臓器の 形状を基に、CT 画像上で 対応臓器の輪郭を作成でき ることを確認する。	JIS Z 4715 9.3 a)に基づいた。
		3) MR 画像用臓器輪郭作成機能 一般的な臓器の形状をあらかじめ登録しておき、この情報を基に、MR 画像上で対応臓器の輪郭を作成できる。	あらかじめ登録した臓器の 形状を基に、MR 画像上で 対応臓器の輪郭を作成でき ることを確認する。	JIS Z 4715 9.3 a)に基づいた。
2	幾 何 学 的 パラメータ 表示機能	1)パラメータの画像上への表示 放射線の照射角度や範囲 を示す実線や破線等を CT 画像や MRI 画像等へ重ね 合わせ表示する。	各々のパラメータを設定する。放射線の照射角度や範囲を示す実線や破線等がCT 画像や MRI 画像等へ重ね合わせ表示されることを確認する。	完成品が意図した性能を 発揮することの確認とし て、必要十分である。
		2) Beam's Eye View 表示 放射線の線源と照射中心を 結ぶ線を法線とする平面の 画像を CT 画像等から再構 成し、この再構成画像上に 照射範囲を実線や破線等 で表示する。	Beam's Eye View が表示されることを確認する。	完成品が意図した性能を 発揮することの確認とし て、必要十分である。
		3) DRR 表示 放射線の線源から照射部位 を透視した画像を CT 画像 等から再構成し、この再構 成画像上に照射範囲を実 線や破線等で表示する。	DRR が表示されることを確認する。	完成品が意図した性能を 発揮することの確認とし て、必要十分である。

	項目	仕様	試験方法	設定根拠
3	線量線量系機量系統	放射線治療装置の照射に 関する幾何学的パラメータを 用いて、線量分布を計算する。 1)X線の線量分布計算 2)電子線の線量分布計算 3)陽子線の線量分布計算 4)重粒子線の線量分布計算 5)Brachytherapy の線量分布計算	サンプルの幾何学的パラメータを用い、線量計算を実施する。線量が計算され、線量分布が表示される。	完成品が意図した性能を発揮することの確認として、必要十分である。
4	線量計算 アルゴリズ ムの評価	開発時に製造元で規定した 試験方法に基づいて試験し た際に設計規格値の範囲内 であること。	製造元で規定した試験方法により確認する。 水中 10cm の正方形 10cm ×10cm の実測値と計算値 を比較した結果、誤差は 〇%/〇mm である。	JIS Z 4715 11.2 a)に基づいた。
5	線量分布解析機能	1)線量統計処理 最大値や平均値や偏差値 等の一般的な統計処理をす る。 2) DVH (Dose Volume Histogram) 線量と体積との関係をグラフ 表示する。	サンプルデータを用いて、 計算を実施する。 表示されることを確認する。	完成品が意図した性能を 発揮することの確認として、必要十分である。 完成品が意図した性能を 発揮することの確認として、必要十分である。
6	照射線量 パラメータ 計算/設 定機能	処方した線量を与えるため の MU 値あるいは停留時間 等を計算もしくは設定する。	処方した線量より MU 値あるいは停留時間等が計算されることを確認する。	完成品が意図した性能を 発揮することの確認とし て、必要十分である。
7		操作者が IMRT 照射や VMAT 照射の線量の分布の 形状を指定し、この指定され た線量分布になるよう幾何 学的パラメータを調整し、指 定の分布になるような幾合わ せを求める。 小線源治療の場合、カテー テルの位置、本数、停留 間等のパラメータを調整し、 指定の分布になるような組 み合わせを求める。	IMRT 照射や VMAT 照射の線量の分布の形状を指定し、この指定された線量分布になるよう幾何学的パラメータが調整され、指定の分布になるような幾何学的パラメータの組み合わせが求められること。小線源治療の場合、カテーテルの位置、本数、停留時間等のパラメータが調整され、指定の分布になるような組み合わせが求められること。	完成品が意図した性能を発揮することの確認として、必要十分である。
8	再計画機能	すでに作成済みの放射線治療計画の輪郭やパラメータを、別の医用画像上に呼び出すことにより、あらたな放射線治療計画の作成を補助する。	すでに作成済みの放射線 治療計画の輪郭やパラメー タを、別の医用画像上に呼 び出すことにより、あらたな 放射線治療計画の作成を 補助できること。	完成品が意図した性能を 発揮することの確認とし て、必要十分である。

(2) . 安全に関する項目

安全に関する項目として以下の規格を参照する。

JIS Z 4715:2011 7安全に取り扱うための一般要求事項 (または IEC 62083:2000 の該当する項)

	項 目	参照規格
1	距離及び長さ寸法	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.1 項
2	放射線量	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.2 項
3	日付及び時刻の書式	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.3 項
4	許可されていない者の使用防止	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.4 項
5	データの制限値	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.5 項
6	不正な変更からの保護	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.6 項
7	データ転送の正確さ	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.7 項
8	座標系及び目盛	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.8 項
9	データの一時保存及びアーカイブ	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.9 項

3.3 貯蔵方法及び有効期間

申請品目は医療機器プログラムであるため記載を省略する。

3. 4 その他の機器の仕様に関する情報

特になし。

4. 設計検証及び妥当性確認文書の概要

4.1 規格への適合宣言

別添資料1として、適合宣言書を添付する。

4. 2 機器の設計検証及び妥当性確認の概要

申請品目が、安全性及び意図する性能を満足することを、以下の試験の実施によって確認した。表 4.2 に機器の設計検証及び妥当性確認の概要を示す。

表 4.2 機器の設計検証及び妥当性確認の概要

(1	(1) 性能				
	項目	規格	検証/試験方法	試験結果	資料番号
1	輪郭作成 機能	1) 閾値処理による輪郭作成を行うことができる。	CT 値等の画像データ値の閾値が登録でき、これらを用いて画像上に輪郭を作成できることを確認する。	適合	別添資料 XX
		2) CT 画像用臓器輪郭作成機能 一般的な臓器の形状をあらかじめ登録しておき、この情報を基に、CT 画像上で対応臓器の輪郭を作成できる。	あらかじめ登録した臓器の形状を基に、CT 画像上で対応臓器の輪郭を作成できることを確認する。	適合	別添資料 XX
		3) MR 画像用臓器輪郭作成機能 一般的な臓器の形状をあらかじめ登録しておき、この情報を基に、MR 画像上で対応臓器の輪郭を作成できる。	あらかじめ登録した臓器の形状を基に、MR 画像上で対応臓器の輪郭を作成できることを確認する。	適合	別添資料 XX
2	幾何学的 パラメータ 設定/表 示機能	1)パラメータの画像上への表示 放射線の照射角度や範囲を 示す実線や破線等を CT 画 像や MRI 画像等へ重ね合 わせ表示する。	各々のパラメータを設定する。 放射線の照射角度や範囲を 示す実線や破線等が CT 画 像や MRI 画像等へ重ね合わ せ表示されることを確認する。	適合	別添資料 XX
		2) Beam's Eye View 表示 放射線の線源と照射中心を 結ぶ線を法線とする平面の 画像を CT 画像等から再構 成し、この再構成画像上に 照射範囲を実線や破線等で 表示する。	Beam's Eye View が表示されることを確認する。	適合	別添資料 XX
		3) DRR 表示 放射線の線源から照射部位 を透視した画像を CT 画像 等から再構成し、この再構成 画像上に照射範囲を実線や 破線等で表示する。	DRR が表示されることを確認 する。	適合	別添資料 XX

	項目	規格	検証/試験方法	試験結果	資料番号
3	線量分布 計算機能 /線量分 布表示機	放射線治療装置の照射に関する幾何学的パラメータを用いて、以下の線量分布を計算する。	サンプルの幾何学的パラメータを用い、線量計算を実施する。線量が計算され、線量分 布が表示される。	適合	別添資料 XX
	能	1)X 線の線量分布計算		適合	別添資料 XX
		2)電子線の線量分布計算		適合	別添資料 XX
		3)陽子線の線量分布計算		適合	別添資料 XX
		4) 重粒子線の線量分布計算		適合	別添資料 XX
		5) Brachytherapy の線量分 布計算		適合	別添資料 XX
4	線量計算 アルゴリズ ムの評価	開発時に製造元で規定した 試験方法に基づいて試験し た際に設計規格値の範囲内 であること。	製造元で規定した試験方法により確認する。 水中 10cm の正方形 10cm×10cm の実測値と計算値を比較した結果、誤差は ○%/○mmである。	適合	別添資料 XX
5	線量分布解析機能	1)線量統計処理 最大値や平均値や偏差値等 の一般的な統計処理をす る。	サンプルデータを用いて、計算を実施する。	適合	別添資料 XX
		2) DVH (Dose Volume Histogram) 線量と体積との関係をグラフ 表示する。	表示されることを確認する。	適合	別添資料 XX
6	照射線量 パラメータ 計算/設 定機能	処方した線量を与えるための MU 値あるいは停留時間等 を計算もしくは設定する。	処方した線量より MU 値あるい は停留時間等が計算されるこ とを確認する。	適合	別添資料 XX
7	放射線治 療パラメ ータ最 化機能	操作者が IMRT 照射や VMAT 照射の線量の分布の 形状を指定し、この指定され た線量分布になるよう幾何学 的パラメータを調整し、指定 の分布になるような幾何学的 パラメータの組み合わせを求 める。 小線源治療の場合、カテー テルの位置、本数、停留時 間等のパラメータを調整し、 指定の分布になるような組み 合わせを求める。	IMRT 照射や VMAT 照射の線量の分布の形状を指定し、この指定された線量分布になるよう幾何学的パラメータが調整され、指定の分布になるような幾何学的パラメータの組み合わせが求められること。小線源治療の場合、カテーテルの位置、本数、停留時間等のパラメータが調整され、指定の分布になるような組み合わせが求められること。	適合	別添資料 XX
8	再計画機 能	すでに作成済みの放射線治療計画の輪郭やパラメータを、別の医用画像上に呼び出すことにより、あらたな放射線治療計画の作成を補助する。	すでに作成済みの放射線治療計画の輪郭やパラメータを、別の医用画像上に呼び出すことにより、あらたな放射線治療計画の作成を補助できること。	適合	別添資料 XX

(2)) 安全性			
	項目	規格及び検証/試験方法	試験結果	資料番号
1	距離及び長さ寸法	JIS Z 4715:2011 (または IEC 62083:2000) 7.1 項	適合	別添資料 XX

(2)) 安全性			
	項目	規格及び検証/試験方法	試験結果	資料番号
2	放射線量	JIS Z 4715:2011	適合	別添資料
		(またはIEC 62083:2000) 7.2 項		XX
3	日付及び時刻の書式	JIS Z 4715:2011	適合	別添資料
		(またはIEC 62083:2000) 7.3 項		XX
4	許可されていない者の使	JIS Z 4715:2011	適合	別添資料
	用防止	(またはIEC 62083:2000) 7.4 項		XX
5	データの制限値	JIS Z 4715:2011	適合	別添資料
		(またはIEC 62083:2000) 7.5 項		XX
6	不正な変更からの保護	JIS Z 4715:2011	適合	別添資料
		(またはIEC 62083:2000) 7.6 項		XX
7	データ転送の正確さ	JIS Z 4715:2011	適合	別添資料
		(またはIEC 62083:2000) 7.7 項		XX
8	座標系及び目盛	JIS Z 4715:2011	適合	別添資料
		(またはIEC 62083:2000) 7.8 項		XX
9	データの一時保存及びア	JIS Z 4715:2011	適合	別添資料
	ーカイブ	(または IEC 62083:2000) 7.9 項		XX

上述の設計検証の結果を以て、本申請品が安全性及び意図した性能を満足することを確認した。

4.3 臨床試験の試験成績

申請品目は、既に一般的に広く使用されている放射線治療計画システムと同等のものであるため、それらの使用成績によって、その安全性は担保されているものと考える。また、4.2 項で示した非臨床試験により、本品の安全性及び性能は担保されていることから、臨床試験に関する考察は不要と判断した。

5. ラベリング

5.1 添付文書(案)

申請品の添付文書(案)に対して、医薬品医療機器等法よって新設された医療機器プログラムであるため、施行前の取扱説明書の該当項目の記述と対比し、以下に示す。

類似する機器	申請品目	異なる部分
【警告】	【警告】	
【禁忌・禁止】	【禁忌・禁止】	
ING NEL	TWEN WILL	
【使用上の注意】	【使用上の注意】	

6. リスクマネジメント

6.1 リスクマネジメントの実施状況

本品目のリスクマネジメントは、主たる設計を行った事業者である XXXXXXXXX において、JIS T14971:2014 に基づき実施されている。

以下に、実施状況についてまとめる。

(1) リスクマネジメントの社内体制

	JIS T 14971 の確認事項	実施手順	
3	リスクマネジメントの 一般的要求事項	社内規定にてリスクマネジメントプロセスを文書化し、リ スクマネジメント実施計画と要員を規定している。	
5	リスク評価	リスクの判断基準は、リスクマネジメント実施計画に予	
7	残留リスクの全体的な評価	め定められている。	

(2) リスク分析の実施状況

(2) リスク分析の美胞状況		
	JIS T 14971 の確認事項	実施手順
3	リスク分析実施メンバー	○○○部門: (氏名)
	リスクマネジメント実施	あらかじめ規定した手順に従いリスク 分析を実施した。
4	リスク分析の手順	
	予め規定したリスク分析手順に従ってリスク分析を行い、 実施と結果を記録している。 ハザードを特定し、ハザード毎にリスクを推定している。	社内規定に従い、リスク評価を 20XX 年 XX 月に実施し、その結果を記録し た。
5	リスク評価	
	特定した各ハザードについて、リスクマネジメント計画で定義した判断基準を用い、推定したリスクが受容可能なリスクより低いことを判断している。	システムハザード分析報告において実施した。
6	リスクコントロール手段の選択と実施	
	下記の一つ以上を用いて、リスクを受容可能レベルまで低減する。 a) 設計による本質的な安全性の確保 b) 製造工程中、又は医療機器本体に防護手段を講じる c) 安全に関する情報	設計トレーサビリティマトリクス及び基本要件チェックリストに掲げられる試験 項目に従って試験を実施し、その適合性が確認された。
	残留リスクの評価	
	残留するリスクをリスクマネジメント計画で定義した判断基準を用いて評価する。	残留リスクについては、添付文書に注 意喚起するよう記載した。
7	残留リスクの全体的な評価	
	リスクマネジメント計画で定義した判断基準を用いて判定 した結果、受容できないと判定した場合は、医学的効用 が全ての残留リスクを上回るかを判定する。	残留リスクについて、全体を評価したと ころ、医学的効用が全ての残留リスク を上回っていることを確認した。

6.2 安全上の措置を講じたハザード

厚生労働省等から安全対策上の対応を求められたハザード、及びその他の重要なハザードはない。

7. 製造に関する情報

7. 1 滅菌方法に関する情報

非該当(滅菌工程なし)

7. 2 品質管理に関する情報

申請品目は医療機器プログラムであるため記載を省略する。

適合宣言書

本宣言書は、販売名『放射線治療計画ソフトウェア RTPWG-2015』を承認申請するにあたり、製造販売する本品目が下記の基準に適合することを宣言する。

- 1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第四十 一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準 (平成十七年 厚生労働省告示 第百二十二号)
- 2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十四条 第二項 第四号及び第十九条の二 第五項において準用する第十四条 第二項 第四号の規定により厚生労働大臣が定める医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年 厚生労働省令第百六十九号)

平成〇〇年 月 日

住所 東京都〇〇〇〇 氏名 医用画像システム株式会社 代表取締役社長 〇〇〇〇 印